

# PRODUCT GUIDE 2026

東京メニックス 製品案内



vol. 5



# MESSAGE



## 全ては ひとつのために

東京メニックスは、今年で創業 51 年（1975 年に創業）を迎えます。

創業時、日本では小動物を対象とした医療機器が

まだ普及していない時代から、

「診察台」「ICU」「ステンレスケージ」などの分野で、

独創的なセンスとアイデアで、業界をリードしてきました。

かけがえのない命を守るために、

常に質の高い製品を目指し、

使う人に「安心」と「喜び」を、追求し続けてきました。

One World, One Health.

人、動物、環境の健康はひとつ。

ひとつの健康（生命）を支えるために、

これからも、信頼される製品を創り続けていきます。

**株式会社 東京メニックス**

## 製品の歴史（一部抜粋）

### 1970年代

創業時は、手術中に心音を聞くための機器「ハートソナー」を考案し開発。創業者自ら、全国を車で走りながら訪問販売しました。



ハートソナー

### 1980年代

当時、診察をしていた台には体重計がなく、動物の体重は人用の体重計で測定していました。そこで、天板に体重計を内蔵した診察台を開発。診察と同時に体重が測定できるため、好評を頂きました。この頃より、現在でも販売をしているアニマルネッカーを開発し、販売を始めました。



診察台



アニマルネッカー

### 1990年代

独創的なアイデアと先端技術を集結し、独自の特許技術を要した、理想的なインキュベーター（IB-3001）を開発。その後、ユニット型動物用 ICU の原型となる「ICU-1001」を開発しました。2基のエアコンを搭載し温度制御、酸素管理を可能にしました。



インキュベーター



動物用 ICU

### 2000年代

動物医療技術の向上とお客様からのご要望に応えるべく、製品のラインナップが充実されていきました。天板形状が異なる手術台、用途に分かれた処置用シンク、電動の診察台などを開発しました。



手術台



診察台



処置シンク

### 2010年代

このころから動物病院の室内インテリアを意識した、デザイン性の高い製品が作られるようになりました。製品のカラーバリエーションを追加し、より安全にご使用いただくように、丸みのあるデザインにしていきました。



診察台



動物用 ICU



# FEATURE of the Company

## 開発・製造・販売・サポートの一貫体制

東京メニックスは、責任を持って製品をご提供するために、開発から製造、販売、サポートまでを一貫して自社で行っていますので、お客様からの様々なご要望にも迅速かつ柔軟に対応します。

### 開発



お客様のご要望を取り入れ、開発チームで企画から設計・評価を一貫して自社で行うため、新たな機能や細かいご要望に対応した製品を開発しています。



### 製造



国内自社工場による生産体制により、「安定した品質・確かな技術力・カスタマイズ対応」を実現し、お客様により良い製品をお届けします。



### 国内販売



国内に営業拠点を3カ所配置し、日本全国のお客様に迅速かつ的確に対応できる体制を整えています。製品を実際に体感できるショールームにより、開業やリニューアル時のご相談にも対応します。



### 海外販売



10の国や地域の現地パートナー企業とタッグを組んで販売、サービスを展開しています。また、海外で行われる展示会にも積極的に出展しています。



### サポート



製品のフォローアップやトラブル時の迅速な対応を行うために、サポート窓口を1年365日開設しています。また、サービススタッフによる技術サポートで安心して製品を末永くご使用いただけます。





## 事業所



北日本営業所・工場

秋田県横手市の横手第2工業団地にある北日本工場は、弊社の製造拠点になっております。東北エリアの販売営業、サポートなどを行っています。

秋田県横手市

埼玉県所沢市

大阪府箕面市



西日本営業所

大阪府箕面市の西日本営業所では、中部から関西、九州の販売営業、サポートなどを行っています。



本 社

埼玉県所沢市の本社では、主に販売営業、製品開発、一部製品の製作、生産管理、技術サポートなどを行っています。

東京メニックスは3つの拠点で全国のお客様をサポート

## ショールーム

本社・西日本営業所にはショールームがございます。製品のご使用方法などをご説明しながら、実際に見て触れて体感することができます。製品のご購入の際には是非ご活用ください。



本 社



西日本営業所

# PRODUCT LINE-UP

## 診察台

- ・アドバンス <電動昇降>
- ・ホライゾン <電動昇降>
- ・Lupo <ガススプリング昇降>
- ・Butterfly <ガススプリング昇降・電動昇降>
- ・Butterfly mini <ガススプリング昇降・電動昇降>
- ・Butterfly extra <ガススプリング昇降>

## 手術台

- ・手術台スカラ V タイプ天板 <ガススプリング昇降・電動昇降>
- ・手術台スカラ F タイプ天板 <ガススプリング昇降・電動昇降>
- ・手術台スカラ撮影台タイプ天板 <ガススプリング昇降・電動昇降>
- ・スカラビークル

## 動物用 ICU

- ・ICU-MENIOS
- ・ICU-MENIOS COMPACT

## 補助機器

- ・ペテリナリーチェア
- ・器具台、万能テーブル
- ・電動ストレッチャー

03

04

05

06

07

08



## Location &gt;&gt;&gt;




診察室




手術室



処置室

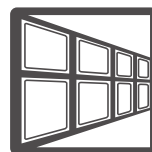

入院室

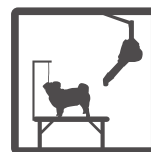

トリミング室

01

02

**ステンレスケージ**

- ・ MIRAI Cage 猫用
- ・ MIRAI Cage 犬用
- ・ MC-ランケージ
- ・ MC ランドア

**ベテリナリーシンク**

- ・ 2 段式多機能シンク
- ・ ベーシックシンク
- ・ サージカルシンク
- ・ 手術用手洗いシンク
- ・ ウォーターテーブル ドルフィン

**ドクターズコラボ**

- ・ メカノアシスト 3・5
- ・ メカノアシストプラス
- ・ メカノダイナミックシステムズ
- ・ ラパロクレイドル
- ・ ツインピラー
- ・ トラキアルチューブケース
- ・ ヤモリ
- ・ サージカルロボット <シンクタイプ天板・透視タイプ天板>









**アニマルネッカー**

- ・ 金属ホック <ブルー・クリア・ソフトエッジ>
- ・ プチホック <クリア・ソフトエッジ>
- ・ すぐテープ
- ・ アニマルネッカー関連製品





# CONTENTS

1.	Message	1
2.	製品の歴史	2
3.	会社の特徴	3-4
4.	PRODUCT LINE-UP	5-6
5.	CONTENTS	7
6.	<b>PRODUCT</b>	
	 診察台	8-21
	 ステンレスケージ	22-35
	 手術台	36-47
	 ベテリナリーシンク	48-57
	 動物用 ICU	58-67
	 ドクターズコラボ	68-77
	 補助機器	78-81
	 アニマルネッカー	82-86
7.	製品動画のご紹介	87-88
8.	会社概要	89-90

# Examination Table

診察台 >>>>



トリミング室



処置室



診察室



実用新案登録出願済

## 業界初「電動昇降式デスク型診察台」

- ・足元すっきり設計
- ・大型犬対応
- ・引出し標準装備

 **ADVANCE**  
診察台アドバンス

製品動画



## Features of Products

## 製品の特徴

新機能

### 体重計表示 【操作スイッチ一体型】

天板の体重計表示には、電源のON・OFF、20/50gの切替スイッチが付いています。上から見える位置にあるのでスイッチ操作が簡単です。

〔表面：ハードコーティング〕

### 座位・立位に対応

昇降のストロークが650mmあるため、適格なポジションで診察や処置をすることができます。

### 大型天板

天板サイズは1100×530mmあるため、大型犬でも対応できます。体重計表示の両サイドに小物が置ける、便利なコンソールトレイが付いています。

新機能

### 障害物検知機能


天板を下げる際に障害物に当たると、障害物と検知し作動がストップします。





NEW


## 診察台アドバンス

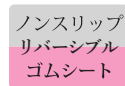

エコで経済的

### 体重計バッテリー標準装備

[12時間充電で約60時間使用可能]

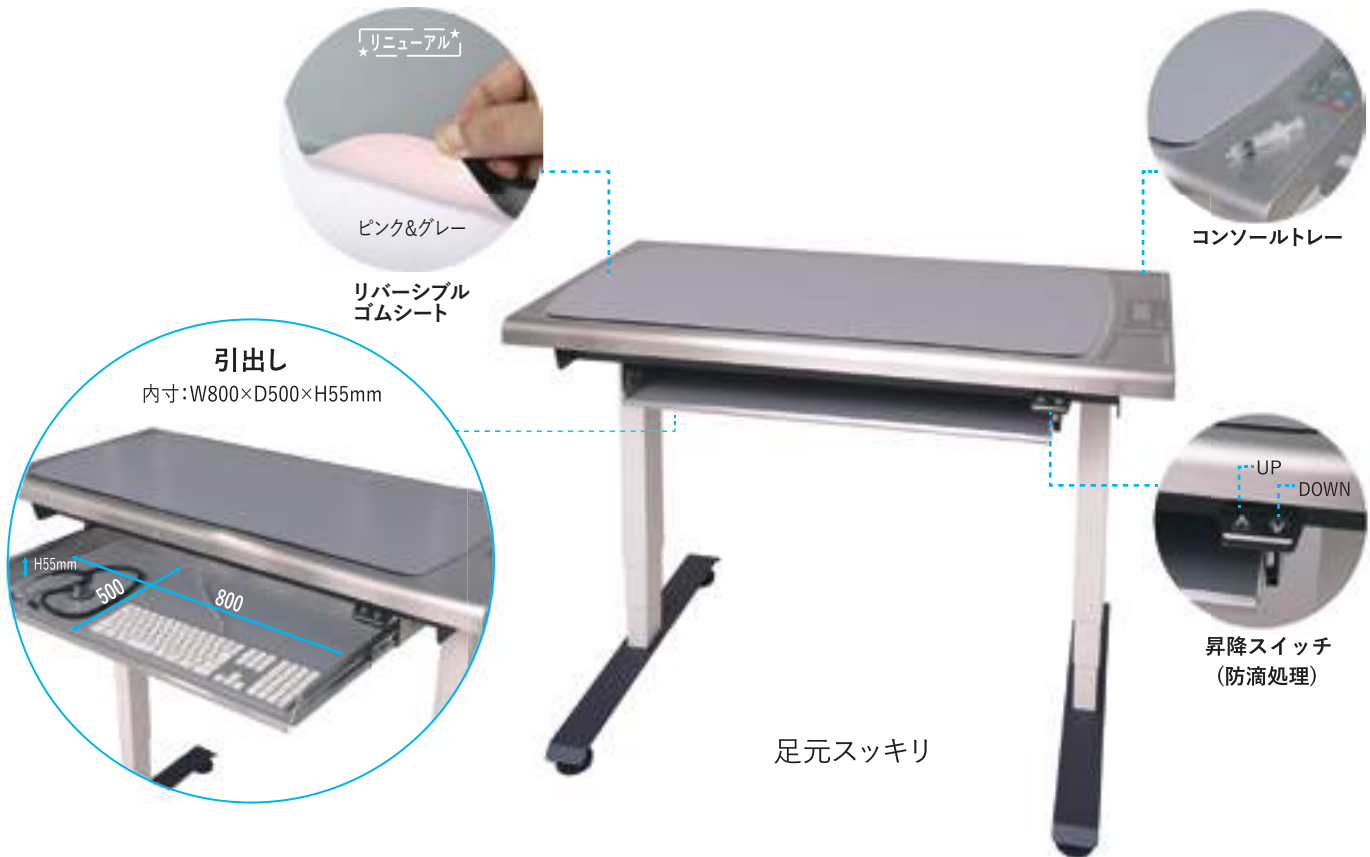

型番	天板 (mm)	昇降 ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g) 電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート (色)	JANコード
製品名	診察台アドバンス (引出し標準装備)							
ADV-1100-EL	1100×530	700～1350 650	57	電動	20/50 ニッケル水素電池	80.0	ピンク&グレー	4582605335498

## OPTION 〈診察台アドバンス〉

### リフトアップキャスター

標準装備されているアジャスターから、キャスターに変更することができます。ロックをするとリフトアップするので、安定感があります。



製品名	サイズ(mm)	JANコード
リフトアップキャスター	W50×H60	4582605330486

### アドバンス専用サイドハンガー

聴診器、タオル、スプレーなどを掛けることができます。取付けは、天板下の両サイドの2カ所に可能です。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
アドバンス専用サイドハンガー	W340×D85×H80	3 kg	4582605335535

### 透明保護カバー

天板全体を保護し、汚れや傷を防ぐことができます。

(軟質塩ビシート)



製品名	サイズ(mm)	JANコード
透明保護カバー	W1102×D532×H82	4582605335528

### レスオプション

#### 引出し無

引出しが、不要な場合は無にすることができます。足元空間がさらにスッキリします。  
※本体価格が変わります



製品名	サイズ(mm)	JANコード
引出し無(アドバンス用)	—	4582605335542

付属品：リバーシブルゴムシート、電源コード、電源コードカバー(モール)、充電器ACアダプタ

## 低床式診察台「使い易い垂直昇降」

- ・最低床 340 mm
- ・大型犬対応



 **HORIZON**  
診察台ホライゾン

### Features of Products

### 製品の特徴



#### 体重計表示 【操作スイッチ一体型】


天板の体重計表示には、電源のON・OFF、20/50gの切替スイッチが付いています。上から見える位置にあるのでスイッチ操作が簡単です。

〔表面：ハードコーティング〕



#### 垂直電動昇降 ロングストローク 【340～960mm】

最低床は340mmまで下がるので、大型犬を乗せやすい高さまで下がります。

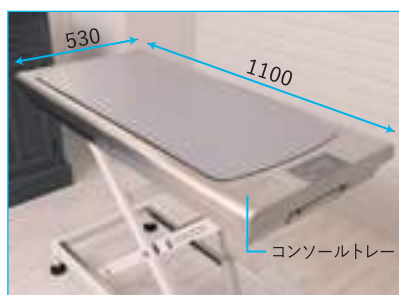

#### 大型天板

天板サイズは1100×530mm があるため、大型犬でも対応できます。体重計表示の両サイドに小物が置ける、便利なコンソールトレイが付いています。




#### フットスイッチ

大きくて踏みやすいフットスイッチは、動物を支えながらも、足で操作できます。



# HORIZON

NEW

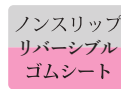

エコで経済的

体重計バッテリー標準装備

[12時間充電で約60時間使用可能]



ピンク&グレー  
リバーシブル  
ゴムシート



コンソールトレイ



最低床 340mm



型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g) 電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート (色)	JANコード
製品名 診察台 ホライゾン								
HRZ-1100-EL	1100×530	340～960・620	50	電動	20/50 ニッケル水素電池	80.0	ピンク&グレー	4582605335511

## OPTION 〈診察台ホライゾン〉

### 透明保護カバー

天板全体を保護し、汚れや傷を防ぐことができます。

(軟質塩ビシート)



### リフトアップキャスター

標準装備されているアジャスターから、キャスターに変更することができます。ロックをするので、リフトアップするので、安定感があります。



製品名	サイズ (mm)	JANコード	製品名	サイズ (mm)	JANコード
透明保護カバー	W1102×D532×H82	4582605335528	リフトアップキャスター	W50×H60	4582605330486

付属品: リバーシブルゴムシート、電源コード(保護チューブ付き)、フットスイッチ、充電器ACアダプター



# LuPo

ルポ、それは「やさしさ」のカタチ  
飼主様とペットが笑顔になれる診察台



ナチュラルなインテリアと調和するモダンデザイン



# LuPo ルポ

猫用の診察台として最適  
ふっくらとした楕円形「樹脂天板」

体重計バッテリー標準装備


[12時間充電で約60時間使用可能]



ノンスリップ  
リバーシブル  
ゴムシート

GSL  
ガススプリング  
昇降

安心  
2年保証

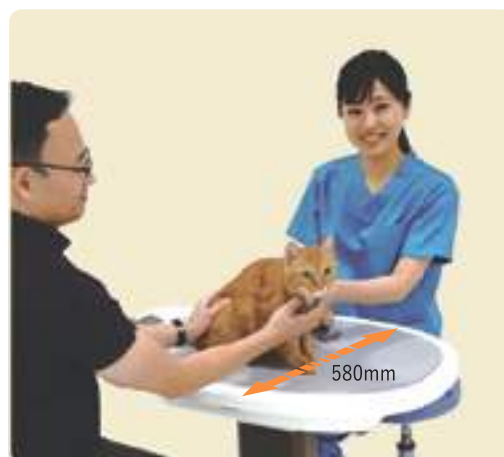

飼主様との距離感が丁度いい天板サイズ



LUPO-850-GS(W)



LUPO-850-GS(Br)

押しやすい体重計スイッチ



体重計スイッチ: ON、OFFの2種類  
充電灯: 充電中は点灯し、充電完了すると消灯します

傾斜があり、大きく見やすい



スケール単位: 50g  
ホールド機能: 1kg以上  
(※ホールドの際に音は鳴りません)



型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g)	電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート (色)	支柱 (色)	JANコード
製品名 診察台ルポ ホワイト / ブラウン										
LUPO-850-GS(W)	W850 × D580	725 ~ 970 · 245	52.3	ガススプリング	50	ニッケル水素電池	80.0	ピンク&グレー	ホワイト	4582605334231
LUPO-850-GS(Br)									ブラウン	4582605334224

付属品: ルポ専用充電器ACアダプタ、リバーシブルゴムシート

# Butterfly バタフライ

## スタンダードモデル

**GSL**  
ガススプリング  
昇降

ノンスリップ  
リバーシブル  
ゴムシート

安心  
2年保証

★リニューアル★



ブルー&アイボリー



ピンク&グレー

リバーシブル ゴムシート

### オプション

体重計の電池  
を充電式バッテリー  
に変更できます



SB-Z



VTS-1000-BF(B)



VTS-1000-BF(P)



VTS-1000-BF(G)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g) 電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート(色)	JANコード
製品名 診察台バタフライ ブルー / ピンク / グレー								
VTS-1000-BF(B)					アルカリ		ブルー&アイボリー	4582605330318
VTS-1000-BF(P)	W1000×D500	695～940・245	52.3	ガススプリング	20/50 単2 (6本)	80.0	ピンク&グレー	4582605330325
VTS-1000-BF(G)							ピンク&グレー	4582605330332

付属品: リバーシブルゴムシート



バタフライシリーズ

LS  
ロングストローク

EL  
電動昇降

ノンスリップ  
リバーシブル  
ゴムシート

安心  
2年保証

# Butterfly バタフライ 電動

## ロングストローク・電動昇降

「小型犬から大型犬まで対応」

★リニューアル★



ブルー&アイボリー

ピンク&グレー

リバーシブル ゴムシート

### オプション

体重計の電池  
を充電式バッテリー  
に変更できます



SB-Z



VTS-1000-TM(B)



VTS-1000-TM(P)



VTS-1000-TM(G)

### ロングストローク電動昇降 最低床550mm



詳しくは動画を  
ご覧ください



型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g) 電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート(色)	JANコード
製品名 診察台バタフライ電動 ブルー / ピンク / グレー								
VTS-1000-TM(B)				電動	アルカリ		ブルー&アイボリー	4582605330363
VTS-1000-TM(P)	W1000×D500	550～950・400	60.0	(A C100V最大170W)	20/50 単2 (6本)	80.0	ピンク&グレー	4582605330356
VTS-1000-TM(G)							ピンク&グレー	4582605330349

付属品: フットスイッチ、電源コード、リバーシブルゴムシート

# Butterfly mini バタフライミニ

猫やエキゾチックアニマル  
の診察に最適

★リニューアル★



ブルー&アイボリー



ピンク&グレー

リバーシブル ゴムシート

オプション

体重計の電池  
を充電式バッテリー  
に変更できます



SB-Z



VTS-750-BF(B)



VTS-750-BF(P)



VTS-750-BF(G)



使用イメージ

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g) 電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート(色)	JANコード
製品名 診察台バタフライミニ ブルー / ピンク / グレー								
VTS-750-BF(B)					アルカリ		ブルー&アイボリー	4582605330400
VTS-750-BF(P)	W750×D450	695～940・245	49.5	ガススプリング	20/50 単2 (6本)	80.0	ピンク&グレー	4582605330417
VTS-750-BF(G)							ピンク&グレー	4582605330424
付属品: リバーシブルゴムシート								

バタフライシリーズ

# Butterfly mini バタフライミニ 電動

猫やエキゾチックアニマル  
の診察に最適



VTS-750-TM(B)



VTS-750-TM(G)



リバーシブル ゴムシート



SB-Z



VTS-750-TM(P)



設置写真

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g)	電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート(色)	JANコード
製品名	診察台バタフライミニ電動 ブルー / ピンク / グレー								
VTS-750-TM(B)	W750×D450	550 ~ 950・400	57.2	電動 (A C100V 最大 170W)	アルカリ 20/50 単 2 (6本)	80.0		ブルー&アイボリー	4582605330370
VTS-750-TM(P)								ピンク&グレー	4582605330387
VTS-750-TM(G)								ピンク&グレー	4582605330394

付属品: フットスイッチ、電源コード、リバーシブルゴムシート

# Butterfly extra バタフライ エクストラ

木調をイメージした診察台  
存在感のあるブラウンの支柱



★リニューアル★

ブルー&アイボリー

リバーシブル  
ゴムシート



VTS-1000-BF(ex)

**GSL**  
ガススプリング  
昇降

安心  
2年保証

ノンスリップ  
リバーシブル  
ゴムシート

## オプション

体重計の電池  
を充電式バッテリー  
に変更できます



SB-Z



設置写真



設置写真

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	スケール 単位 (g)	電源	最大積載量 (kg)	リバーシブル ゴムシート(色)	JANコード
製品名	診察台バタフライ エクストラ								
VTS-1000-BF(ex)	W1000×D500	695 ~ 940・245	52.3	ガススプリング	20/50	アルカリ 単2 (6本)	80.0	ブルー&アイボリー	4582605330431

付属品: リバーシブルゴムシート



## ■製品の仕様と特徴

## 【バタフライシリーズ】

## 【ルポ】

## 体重計表示



数値が安定すると、表示を固定する「ホールド機能」、電池の消耗を抑える「オートオフ機能」が付いています。  
(ホールド機能:2kg以上)

スケール単位:20/50g切替



大きくて見やすい体重計表示は表示部が傾斜しているため、離れた位置からでも見ることができます。オートオフ機能付き。

(ホールド機能:1kg以上)

スケール単位:50g

## 体重計スイッチ



スイッチには、ON/ゼロ、20/50gの切替、風袋、OFFの4種類です。



天板側面に、大きくて押しやすいON、OFFのスイッチが付いてます。体重計のバッテリーを充電すると充電灯(LED)が点灯し、充電完了になると消灯します。

## 天板



ステンレス製の天板は、角が丸く滑らかにしているので、安全で使う人に優しいデザインになっています。



天板には、アクリル変性高衝撃塩ビ板が使われており、高い耐衝撃性に加え、耐薬品性、難燃性など多くの優れた特性をもっています。

## 体重計の電源



体重計の電源は、単2のアルカリ電池を6本使用します。電池は天板裏側に収納されています。



体重計の電源は、充電式のニッケル水素電池を使用します。満充電で約60時間測定できます。  
(ご使用状況により変わります)

## 【バタフライシリーズ・ルポ 共通】

■高耐食性  
アルマイト処理

ガスブリッジの支柱は、アルミニウム製で、アルマイト処理がされているので、サビなどに耐性があります。



## ■ベースについて

ベースにはアクリル変性高衝撃塩ビ板が使われており、高い耐衝撃性に加え、耐薬品性、難燃性など多くの優れた特性をもっています。

■リバーシブル  
ゴムシートについて

両面に滑り止め加工がされています。



## ■昇降台について



### ロングストローク電動昇降 (400mm)



400mmのロングストローク電動昇降システムは、ガタツキがなく、音も静かでスムーズです。付属のフットペダルのUP/DOWNを踏むことで昇降します。最低位550mmまで下がりますので、大型犬の上げ下ろしも楽に行うことができます。



ペダルを踏む

ペダルを踏みながら天板を押す

### ガススプリング昇降



ガススプリングの反発力で天板を昇降することができます。ペダルを踏むと上昇し、ペダルを離すと止まります。下げるときは、ペダルを踏みながら天板を下に押すと下がります。 ※電源不要

## OPTION 〈診察台〉

### SB-Z

体重計を電池式から充電バッテリーに付け替えることができます。

付属：充電器ACアダプタ



ニッケル水素電池

### 体重計ACアダプタ仕様

体重計を電池式からACアダプタ仕様に変更できます。

付属：ACアダプタ



製品名	対応機種	JANコード
SB-Z (体重計用充電バッテリー)	バタフライシリーズ	4582605335597

製品名	対応機種	JANコード
体重計ACアダプタ仕様	バタフライシリーズ	4582605330455

### 診察台用スライド式 ロープホルダー

天板にスライド式のロープホルダーを取付けることができます。

付属：スライドレール2本  
ロープホルダー4つ、ロープ4本



製品名	対応機種	JANコード
診察台用スライド式ロープホルダー	バタフライシリーズ	4582605330462

### リフトアップキャスター

標準装備されているアジャスターから、キャスターに変更することができます。ロックをするとリフトアップするので、安定感があります。

高さ：60mm



製品名	対応機種	JANコード
リフトアップキャスター	全機種	4582605330486

## 消耗品

製品名	対応機種	サイズ(mm)	簡易図	色	JANコード
リバーシブルゴムシート アドバンス・ホライゾン用	アドバンス ホライゾン	W963×D450		ピンク＆グレー	4582605335603
				ブルー＆アイボリー	4582605335610
リバーシブルゴムシート 診察台用・標準	バタフライ バタフライエクストラ バタフライ電動	W880×D440		ピンク＆グレー	4582605335689
				ブルー＆アイボリー	4582605335719
リバーシブルゴムシート 診察台用・ミニ	バタフライミニ バタフライミニ電動	W630×D400		ピンク＆グレー	4582605335696
				ブルー＆アイボリー	4582605335702
リバーシブルゴムシート ルポ用	ルポ	W713×D508		ピンク＆グレー	4582605335634
				ブルー＆アイボリー	4582605335627
体重計バッテリー (充電式)	ルポ	W75×D52×H35		—	4582605330585
	アドバンス ホライゾン				
充電器ACアダプタ	ルポ	W30×D70×H80 (コード：1.8m)		—	4582605334309
	アドバンス ホライゾン				

# Stainless Cage

## ステンレスケージ >>>>



トリミング室




処置室



入院室





A photograph of a woman with reddish-brown hair, wearing a light yellow long-sleeved shirt and brown pants, crouching in a grassy field. She is smiling and holding a light-colored dog, possibly a Weimaraner, which is also smiling. The background is filled with lush green trees and foliage, with sunlight filtering through the leaves. A teal-colored rectangular box with a white border is superimposed over the upper part of the image, containing white Japanese text.

人とペットが  
幸せに暮らせる  
未来のために



# MIRAI Cage

未来に引き継がれるケージ



製品動画  
ミライケージ



## ORIGIN

### 原点、想い

MIRAI Cage のネーミングは未来に受け継がれていくケージを目指して名づけました。皆、大切なペットを閉鎖的な場所に閉じ込めることを本望とは思っていません。やむを得ずそうしているだけです。だからこそ、その閉鎖的な空間を、開放的（快適）にしてあげたい。それが MIRAI Cage の ” 原点 ” です。

## FEATURE

### 医療家具としての佇まい

情緒的安定感や美意識の高まりに対して、たどり着いた”カタチ”。扉の金具をケージの内側に収めることで、シンプルで落ち着いた医療家具としての佇まいを感じることができます。前面に金具が無いことで、掃除もし易く衛生的です。また、扉の軽量化とロック機構の改良により、扉を閉めた際の金属音を軽減しました。

## LINEUP

### 新しいラインナップ

MIRAI cage は、ペットが快適に過ごせるように「サイズ」「素材」「強度」などすべてを”ゼロ”から見直しました。新規格のワイド 840mm のケージを新しいラインナップに加え、より広い室内空間を確保。そして、「猫用ケージ」「犬用ケージ」と2つラインナップに分けて展開し、猫と犬の特徴に合わせて製品開発をしました。

# MIRAI Cage

ミライ ケージ

CAT 猫用



猫用ケージの扉は、犬用より格子のピッチが狭いため、いたずらされにくくなっています。ケージの上部には、多目的レールが標準装備されていますので、「ハンガーシェルフ」「パーテーションシート」の猫用オプションやハンモック(市販)などを、取付けることができます。MC-CAT-S、MC-CAT-Lに付属されている猫用仕切板は、2枚仕様になっており1枚の仕切板の上下を反転すると、猫用通路になりますので、左右の行き来や掃除や給餌の際に便利です。




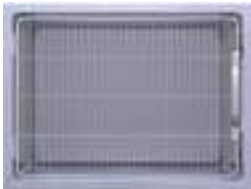
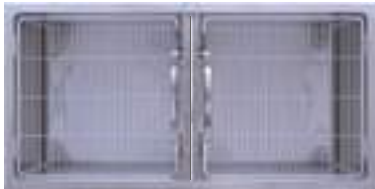



猫用多目的レール  
(オプションやハンモックなどを取付可能)



(トイレを置くスペースを確保)

ワイド840mmのケージ  
(CAT-S2/3、CAT-L2/3)

CAT  
猫用

D650	H630	CAT-S $\frac{1}{2}$ 	CAT-S $\frac{2}{3}$ 	CAT-S 
	H840	CAT-L $\frac{1}{2}$ 	CAT-L $\frac{2}{3}$ 	CAT-L 
		W630	W840	W1260

製品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	猫用仕切り板 (2枚仕様)	重量 (kg)	JANコード
製品名 MIRAI Cage 猫用					
MC-CAT-S 1/2	W630×D650×H630	W566×D650×H566	—	16	4582605334354
MC-CAT-S 2/3	W840×D650×H630	W776×D650×H566	—	19	4582605334347
MC-CAT-S	W1260×D650×H630	W1196×D650×H566	○	33	4582605334330
MC-CAT-L 1/2	W630×D650×H840	W566×D650×H776	—	19	4582605334361
MC-CAT-L 2/3	W840×D650×H840	W776×D650×H776	—	23	4582605334378
MC-CAT-L	W1260×D650×H840	W1196×D650×H776	○	40	4582605334385

※すべて猫用ケージには、猫用多目的のルールが標準装備されています。

## Features of Products

## 製品の特徴



## 猫用トビラ

角パイプフレーム構造で従来品より、丈夫で軽量になりました。猫用は犬用より、格子ピッチが狭くなっています。



## 猫用多目的のルール

オプションやハンモックなどを掛けることができます。  
※猫用ケージには標準装備されています。  
【特許出願中】



## 静かな開閉音

動物のストレスを軽減するため従来品より、扉を閉める時の音が約半分に減りました。  
(平均で約15dB軽減)

(猫用・犬用共通)



## 豊富なオプション

上下通路、キャットシェルフ、パーティションシートなどの猫に適したオプションを豊富に揃えました。

## 猫通路付き仕切板(2枚仕様) ※猫用のみ



1枚引き出す



上下を反転する



奥まで入れる



# MIRAI Cage

ミライ ケージ

DOG 犬用



犬用ケージの扉は、猫用より太い丸棒で作られていますので頑丈です。MC-DOG-Lの中央部には、ワンタッチで外れる着脱支柱が、標準装備されています。仕切り板を抜き、支柱を外す事で大型犬の出し入れが楽にできます。又、支柱を装着したままでも仕切板を抜き差しする事ができますので便利です。




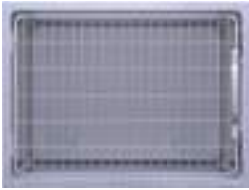




着脱支柱  
(DOG-Lの支柱は取り外しができます)



ワイド840mmのケージ  
(DOG-S2/3、DOG-L2/3)



DOG  
犬用

D650	H630	<b>DOG-S<math>\frac{1}{2}</math></b> 	<b>DOG-S<math>\frac{2}{3}</math></b> 	<b>DOG-S</b> 
	H840	<b>DOG-L<math>\frac{1}{2}</math></b> 	<b>DOG-L<math>\frac{2}{3}</math></b> 	<b>DOG-L</b> 
		W630	W840	W1260

製品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	着脱支柱	重量 (kg)	JANコード
製品名 MIRAI Cage 犬用					
MC-DOG-S 1/2	W630×D650×H630	W566×D650×H566	—	16	4582605334415
MC-DOG-S 2/3	W840×D650×H630	W776×D650×H566	—	19	4582605334408
MC-DOG-S	W1260×D650×H630	W1196×D650×H566	—	34	4582605334392
MC-DOG-L 1/2	W630×D650×H840	W566×D650×H776	—	20	4582605334422
MC-DOG-L 2/3	W840×D650×H840	W776×D650×H776	—	24	4582605334439
MC-DOG-L	W1260×D650×H840	W1196×D650×H776	○	41	4582605334446

## Features of Products

## 製品の特徴



## 静かな開閉音

動物のストレスを軽減するため  
に従来品より、扉を閉める時の音  
が約半分になりました。  
(平均で約15dB軽減)

(猫用・犬用共通)



## 犬用トビラ

角パイプフレームの扉は、軽量  
で強度があります。犬用は猫用  
より格子のピッチが広く、太い  
ステンレス丸棒を採用していま  
す。



## 高断熱ケージ

ケージの上下左右の外側に断熱  
材が入っています。ペットが快適  
に過ごせるだけでなく、鳴き声や  
爪音の反響音を抑える効果もあ  
ります。

(猫用・犬用共通)



## 着脱支柱

DOG-Lの中央部には、ワンタッ  
チで外れる着脱支柱がついて  
います。仕切り板を抜き、支柱を  
外すことで大型犬の出し入れが  
楽にできます。又、支柱を装着し  
たままでも仕切板を抜き差しする  
事ができます。

## トビラの開きを変更可能



トビラを外す

丁番などの金具を外して  
左右を逆にして取付ける


トビラを反転して入れる




「右開き」⇒「左開き」に変更

# 犬猫共通ユニット一覧（※犬用と猫用でケージは異なります）


No.1

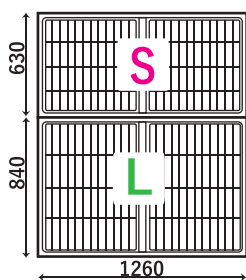


No. 2

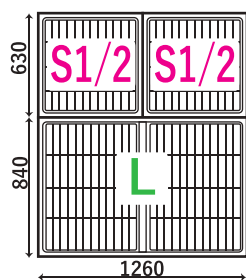

No. 3

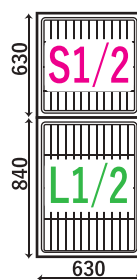


No. 4

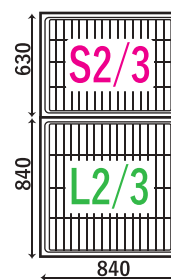


製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 1	CAT-S, CAT-L	1260×650×1470	73	4582605334477
MC-DOG-No. 1	DOG-S, DOG-L	1260×650×1470	75	4582605334705
MC-CAT-No. 2	CAT-S1/2×2, CAT-L	1260×650×1470	72	4582605334484
MC-DOG-No. 2	DOG-S1/2×2, DOG-L	1260×650×1470	73	4582605334699

製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 3	CAT-S1/2, CAT-L1/2	630×650×1470	35	4582605334491
MC-DOG-No. 3	DOG-S1/2, DOG-L1/2	630×650×1470	36	4582605334682
MC-CAT-No. 4	CAT-S2/3, CAT-L2/3	840×650×1470	42	4582605334507
MC-DOG-No. 4	DOG-S2/3, DOG-L2/3	840×650×1470	43	4582605334675

No. 9

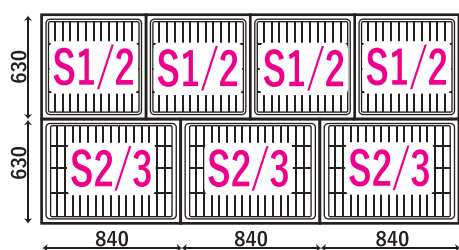

No. 10

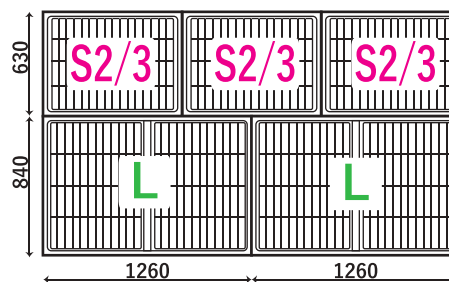


製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 9	CAT-S1/2×4, CAT-S2/3×3	2520×650×1260	121	4582605334552
MC-DOG-No. 9	DOG-S1/2×4, DOG-S2/3×3	2520×650×1260	121	4582605334620


製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 10	CAT-S2/3×3, CAT-L×2	2520×650×1470	137	4582605334569
MC-DOG-No. 10	DOG-S2/3×3, DOG-L×2	2520×650×1470	139	4582605334613

ユニットは一例です。このほかにも多彩な組み合わせをすることができます。


No.5

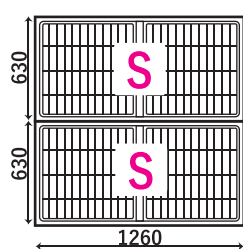


No. 6

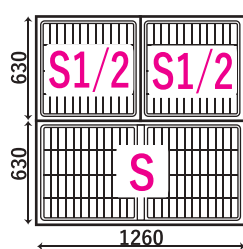

No. 7

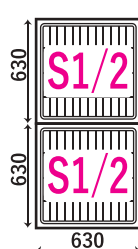


No. 8

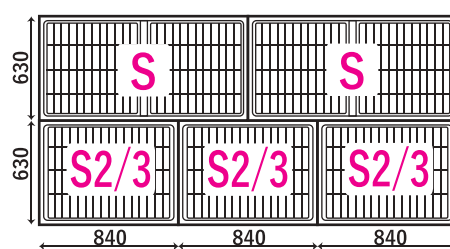


製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 5	CAT-S×2	1260×650×1260	66	4582605334514
MC-DOG-No. 5	DOG-S×2	1260×650×1260	68	4582605334668
MC-CAT-No. 6	CAT-S1/2×2, CAT-S×1	1260×650×1260	65	4582605334521
MC-DOG-No. 6	DOG-S1/2×2, DOG-S×1	1260×650×1260	66	4582605334651

製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 7	CAT-S1/2×2	630×650×1260	32	4582605334538
MC-DOG-No. 7	DOG-S1/2×2	630×650×1260	32	4582605334644
MC-CAT-No. 8	CAT-S×2, CAT-S2/3×3	2520×650×1260	123	4582605334545
MC-DOG-No. 8	DOG-S×2, DOG-S2/3×3	2520×650×1260	125	4582605334637

No. 11

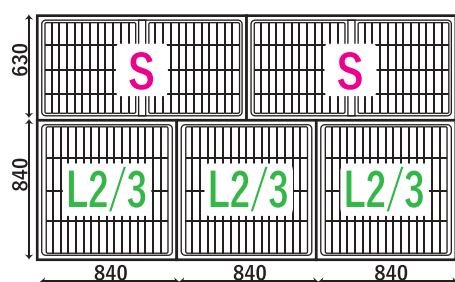

No. 12

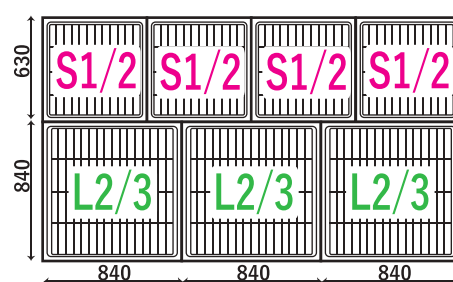

製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 11	CAT-S×2, CAT-L2/3×3	2520×650×1470	135	4582605334576
MC-DOG-No. 11	DOG-S×2, DOG-L2/3×3	2520×650×1470	140	4582605334606

製品名	構成	サイズ(W×D×Hmm)	重量(kg)	JANコード
MC-CAT-No. 12	CAT-S1/2×4, CAT-L2/3×3	2520×650×1470	133	4582605334583
MC-DOG-No. 12	DOG-S1/2×4, DOG-L2/3×3	2520×650×1470	136	4582605334590

## OPTION 〈ステンレスケージ〉

### MC天板

ケージの上部にステンレスの板を取付けることで断熱材を隠して、上に物を置くことができ、隙間への小物の落下を防ぎます。



### MC側板

ケージの側面にステンレスの板を取付けることで断熱材を保護し、見た目も美しくなります。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC天板 (S1/2・L1/2用)	○	○	W630×D650	4582605334712
MC天板 (S2/3・L2/3用)	○	○	W840×D650	4582605334729

※S・L用は、(S1/2・L1/2用)が2枚になります。

製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC側板 (S1/2・S・S2/3用)	○	○	H630×D650	4582605334736
MC側板 (L1/2・L・L2/3用)	○	○	H840×D650	4582605334743


### MCホワイト天板

ケージ側面にホワイトボードと同じ素材を取付ける事で、断熱材を保護し、見た目も美しくなります。



### MCホワイト側板

ケージ側面にホワイトボードと同じ素材を取付ける事で、断熱材を保護し、見た目も美しくなります。さらにボードマーカーでメモを書くことや磁石で物を貼りつけることも可能です。

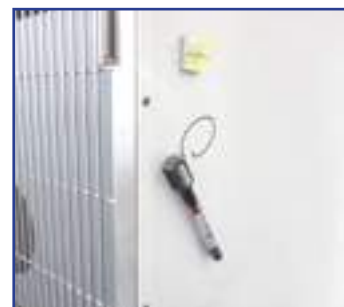

製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MCホワイト天板 (S1/2・L1/2用)	○	○	W630×D650	4582605335399
MCホワイト天板 (S2/3・L2/3用)	○	○	W840×D650	4582605335405

※S・L用は、(S1/2・L1/2用)が2枚になります。

製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC ホワイト側板 (S1/2・S2/3・S用)	○	○	H630×D650	4582605335412
MC ホワイト側板 (L1/2・L2/3・L用)	○	○	H840×D650	4582605335429

### MC標準架台

架台を付けることで、動物の出し入れやケージの掃除が楽になります。(高さは80mm)

※特注でサイズ変更可能



### MCキャスター架台

架台とキャスターが一体型になっています。

※ケージに直接、キャスターを取付けることはできません。  
※W1260を超えるユニットに付る際は特注対応となります。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC標準架台 (S1/2・L1/2用)	○	○	W630×D650×H80	4582605334798
MC標準架台 (S2/3・L2/3用)	○	○	W840×D650×H80	4582605334804
MC標準架台 (S・L用)	○	○	W1260×D650×H80	4582605334811

製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MCキャスター架台 (S1/2・L1/2用)	○	○	W630×D650×H145	4582605334828
MCキャスター架台 (S2/3・L2/3用)	○	○	W840×D650×H145	4582605334835
MCキャスター架台 (S・L用)	○	○	W1260×D650×H145	4582605334842

### MC脚付き架台

ペットの出し入れや掃除が楽になるだけでなく、下の空間を収納として活用できます。市販の衣装ケースが入ります。



### ノンスリップ防水マット

ケージの中でペットシーツや食器を滑りにくくすることができます。丈夫で汚れた際も水洗いができます。

材質: ポリウレタン  
表面: シリコンコーティング



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC脚付き架台 (S1/2・L1/2用)	○	○	W630×D650×H450	4582605334859
MC脚付き架台 (S2/3・L2/3用)	○	○	W840×D650×H450	4582605334866
MC脚付き架台 (S・L用)	○	○	W1260×D650×H450	4582605334873

製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
ノンスリップ防水マット (S1/2・L1/2用)	○	○	W550×D580	4582605334880
ノンスリップ防水マット (S2/3・L2/3用)	○	○	W760×D580	4582605334897
ノンスリップ防水マット (S・L用) 2枚set	○	○	W550×D580	4582605334903

※S・L用は「S1/2・L1/2用」が2枚です。



## MC敷スノコ

耐久性に優れたステンレス製 (SUS304)。格子のピッチが細かくなっているため、動物に優しい設計になっています。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC敷スノコ (S1/2・L1/2用)	○	○	W560×D620×H33	4582605334910
MC敷スノコ (S2/3・L2/3用)	○	○	W770×D620×H33	4582605334927
MC敷スノコ (S・L用)2枚set	○	○	W586×D620×H33	4582605334934

## MC猫用上下通路

上下のケージを行き来することができます。使用しないときは、円形の蓋で閉じることができます。

※犬用ケージには取付不可



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC猫用上下通路	○		Φ160	4582605334989

## MCネブライザードア

ネブライザーをするときに、通常の扉から交換して使用します。

※パッキンを使用していないため、若干の隙間があります。酸素室としての利用はできません。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MCネブライザードア (S1/2用)	○	○	W576×D40.5×H564	4582605335009
MCネブライザードア (S2/3用)	○	○	W786×D40.5×H564	4582605335016
MCネブライザードア (S用)2枚set	○	○	W576×D40.5×H564	4582605335023
MCネブライザードア (L1/2用)	○	○	W576×D40.5×H774	4582605335030
MCネブライザードア (L2/3用)	○	○	W786×D40.5×H774	4582605335047
MCネブライザードア (L用)2枚set	○	○	W576×D40.5×H774	4582605335054

## MCカラーシート加工

ケージの額縁にカラーシートを貼る加工です。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
カラーシート加工 (S1/2用)	○	○	—	4582605335122
カラーシート加工 (S2/3用)	○	○	—	4582605335139
カラーシート加工 (S用)	○	○	—	4582605335146
カラーシート加工 (L1/2用)	○	○	—	4582605335153
カラーシート加工 (L2/3用)	○	○	—	4582605335160
カラーシート加工 (L用)	○	○	—	4582605335177

※天板、側板、架台は別途見積になります。

## MCケージヒーター

ケージ底面の裏側に貼りつけたヒーターによって、ケージを温めます。置き型のコントローラーで温度調整ができます。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MCケージヒーター1ch	○	○	W190×D295×H176	4582605334941
MCケージヒーター2ch	○	○	W190×D295×H176	4582605334958
MCケージヒーター3ch	○	○	W190×D295×H176	4582605334965
MCケージヒーター4ch	○	○	W190×D295×H176	4582605334972

## MC猫用ハンガーシェルフ

猫用の棚は、多目的レールに吊下げて固定します。高さは5段階で調整できます。棚の幅はスライド式で調整可能なため、すべてのケージに取付け可能です。

※犬用ケージには取付不可

【特許出願中】



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MC猫用ハンガーシェルフ	○		W556~776×D180×H400	4582605334996

## MCパーティションシート

パーティションシートによって猫の居場所を作ります。お世話の時はシャイな猫からの威嚇を和らげ、ストレスを軽減します。※犬用ケージには取付不可

【特許出願中】

開口部:180mm×180mm



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
MCパーティションシート (S1/2用)	○		W495×H495	4582605335061
MCパーティションシート (S2/3用)	○		W705×H495	4582605335078
MCパーティションシート (S用)2枚set	○		W495×H495	4582605335085
MCパーティションシート (L1/2用)	○		W495×H705	4582605335092
MCパーティションシート (L2/3用)	○		W705×H705	4582605335108
MCパーティションシート (L用)2枚set	○		W495×H705	4582605335115

## クリップ付ネームプレート

ホワイトボード素材なので、動物の情報を直接記入したり、クリップやマグネットでメモを貼ったり。スタッフ皆さまの情報共有ツールとして大変便利です。



製品名	猫用	犬用	サイズ(mm)	JANコード
クリップ付ネームプレート2枚	○	○	W115×H185×D20	4582605335436
クリップ付ネームプレート8枚	○	○	W115×H185×D20	4582605335443

※ICU-MENIOSのスライドフックに取付けすることができます




# MC-ランケージ

パネルの組み合わせでサイズ変更可能  
耐久性、耐食性に優れたオールステンレス仕様  
動物愛護法対応



## Features of Products


## 製品の特徴

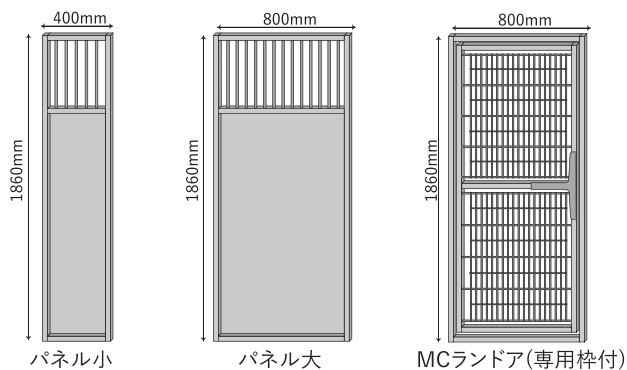


MCランケージは、パネル大・パネル小・MCランドア（専用枠付）の3つで構成されています。パネルの組み合わせは自由自在で、上記画像のように側面（パネル）を共有して、連結することもできます。（MCランドアは P.35 を参照）

パネル小：W400×H1860×D30mm  
パネル大：W800×H1860×D30mm  
MCランドア：W800×H1860×D30mm


## RC-86-80

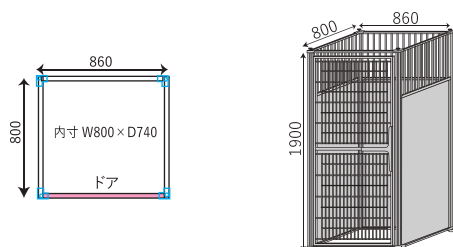


## RC-126-120

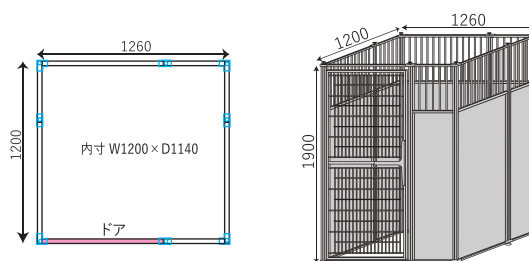


## RC-86-120

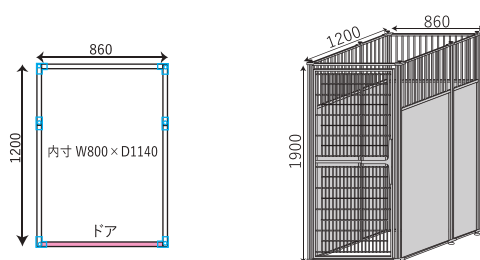


## RC-126-160

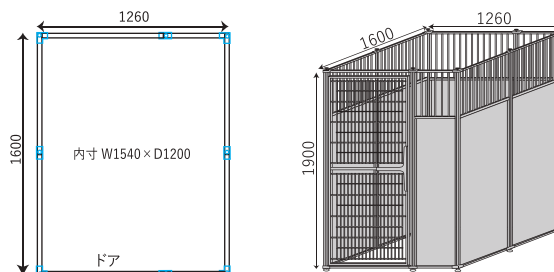

## RC-86-160

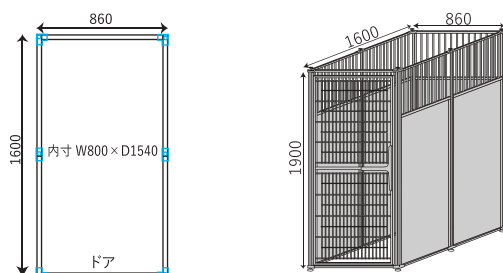

## RC-166-120

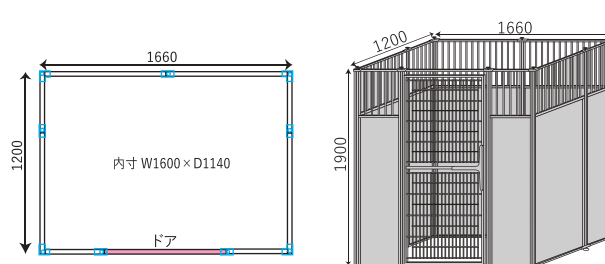

※上記以外の組み合わせも可能です

製品名	外寸 (mm)	内寸 (mm)	重量 (kg)	JANコード
<b>製品名 MC-ランケージ</b>				
RC-86-80	W860×D800×H1900	W800×D740×H1900	78.1	4582605335238
RC-86-120	W860×D1200×H1900	W800×D1140×H1900	101.6	4582605335245
RC-86-160	W860×D1600×H1900	W800×D1540×H1900	115.6	4582605335252
RC-126-120	W1260×D1200×H1900	W1200×D1140×H1900	125.1	4582605335269
RC-126-160	W1260×D1600×H1900	W1200×D1540×H1900	139.1	4582605335276
RC-166-120	W1660×D1200×H1900	W1600×D1140×H1900	143.9	4582605335283

※外寸には接続金具の寸法は含まれていません

## OPTION 〈ランケージ〉



## ランケージ用底板

床面に、皿状の底板を付けることができます。ステンレス製で深さは55mmあります。

製品名	サイズ(mm)	JANコード
RC-86-80 用底板	W800×D740×H55	4582605335290
RC-86-120 用底板	W800×D1140×H55	4582605335306
RC-86-160 用底板	W800×D1540×H55	4582605335313
RC-126-120 用底板	W1200×D1140×H55	4582605335320
RC-126-160 用底板	W1200×D1540×H55	4582605335337
RC-166-120 用底板	W1600×D1140×H55	4582605335344

# MC-ランドア


※特注でサイズ変更ができます

大型犬から超大型犬まで対応

耐久性、耐食性に優れたオールステンレス仕様

トビラの「右開き・左開き」を変更可能

2重ロック機構

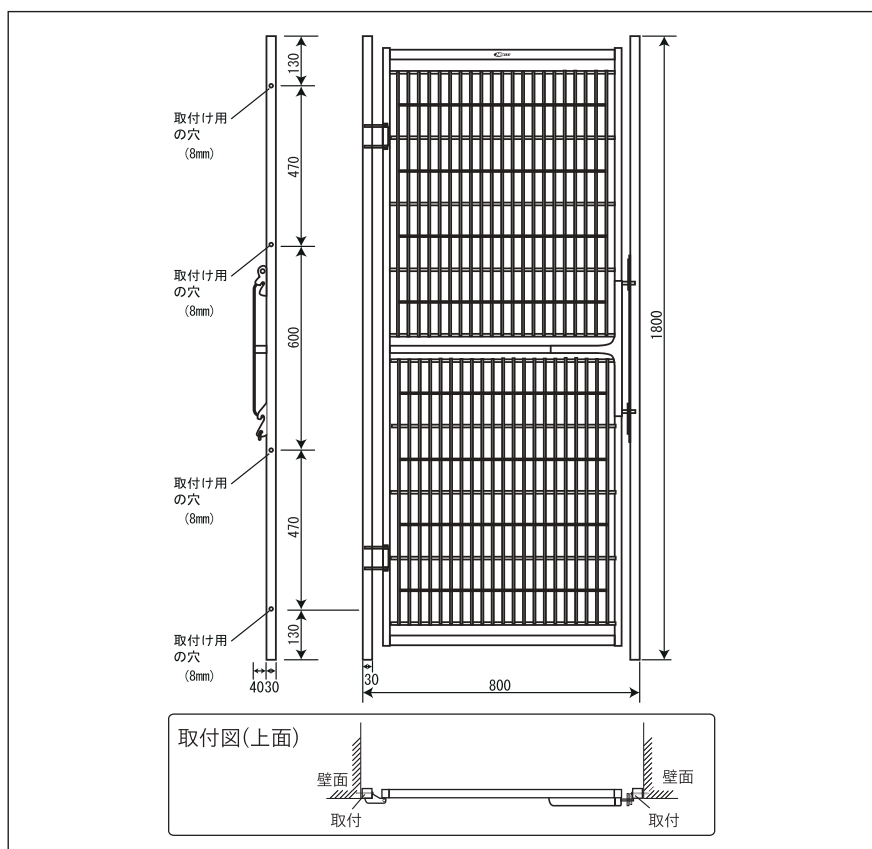

製品名	サイズ (mm)	重量 (kg)	材質	付属品	JANコード
製品名 MC-ランドア					
MC-ランドア	W800×D70×H1800	18.4	SUS304	取付用ネジ	4582605335184



# Operating Table

手術台 >>>>



処置室



手術室





## 手術台スカラ Vタイプ

新チルトシステムを標準装備し、左右どちらにもチルトできます。新Vタイプ天板はガสปリングの力で簡単にV型にすることができます。天板下のエクステンションベース(標準)には、エクステンションシリーズを取付けることができます。



製品動画  
Vタイプ・Fタイプ



### Features of Products

### 製品の特徴



#### 新チルトシステム

ハンドルが前後に付いているため、どちらでも傾きの調整ができます。また、「水平補正機能」がついているので簡単に、水平に戻すことができます。



#### エクステンションベース

W1000mm天板の両側には、オプションのエクステンションシリーズが簡単に付けられるように、標準でエクステンションベースが付いています。最大W1500まで延長可能です。



#### Vタイプ天板 (パドルレバー)

天板裏のパドルレバーを握るとガสปリングによるサポートで、片側別々で容易に角度が変えられます。(無段階)



#### Vタイプ天板 (汚水トレイ)

天板には汚水トレイを装備していますので、下部に流れにくくなっています。



安心  
2年保証

NTS  
新チルト  
システム



OV-1000T-GS  
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	天板開閉角度 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名	手術台スカラ V タイプ ガススプリング チルト有							
OV-1000T-GS	W1000×D530	760～1010・250	51.0	ガススプリング	右 20、左 20	片側最大 20	70.0	4582605330592
付属品: クランプ式ロープホルダー×4、ロープ×4								



安心  
2年保証



NTS  
新チルト  
システム



OV-1000T-TM  
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	天板開閉角度 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名	手術台スカラ V タイプ 電動 チルト有							
OV-1000T-TM	W1000×D530	600～1000・400	56.0	電動 (A C100V 最大170W)	右 20、左 20	片側最大 20	70.0	4582605330608
付属品: クランプ式ロープホルダー×4、ロープ×4、電源コード、フットスイッチ								



## 手術台スカラ F タイプ

シンプルなフラット天板でありながら、多種多様なオプションを追加することにより、様々な医療ニーズに対応できる手術台です。



製品動画  
Vタイプ・Fタイプ



### Features of Products

### 製品の特徴



#### 新チルトシステム

ハンドルが前後に付いているため、どちらでも傾きの調整ができます。また、「水平補正機能」がついているので簡単に、水平に戻すことができます。



#### エクステンションベース

W1000mm天板の両側には、オプションのエクステンションシリーズが簡単に付けられるように、標準でエクステンションベースが付いています。最大W1500まで延長可能。



#### F タイプ天板

シンプルなフラットタイプの天板はチルト機能の有無が選択できます。「チルト」は将来的に取付けることができます。



#### クランプ式ロープホルダー

天板にレールレスで取付けできるので、汚れやゴミが溜まらないため清潔に保つことができます。

Vタイプ、Fタイプ共通





OF-1000N-GS  
(チルト無)



OF-1000T-GS  
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名 手術台スカラFタイプ ガススプリング チルト 無 / 有							
OF-1000N-GS	W1000×D530	680～930・250	51.0	ガススプリング	無	70.0	4582605330615
OF-1000T-GS	W1000×D530	740～990・250	51.0	ガススプリング	右 20、左 20	70.0	4582605330622

付属品: クランプ式ロープホルダー×4、ロープ×4



OF-1000N-TM  
(チルト無)



OF-1000T-TM  
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名 手術台スカラFタイプ 電動 チルト 無 / 有							
OF-1000N-TM	W1000×D530	520～920・400	56.0	電動 (A C100V最大170W)	無	70.0	4582605330646
OF-1000T-TM	W1000×D530	610～1010・400	56.0	電動 (A C100V最大170W)	右 20、左 20	70.0	4582605330639

付属品: クランプ式ロープホルダー×4、ロープ×4、電源コード、フットスイッチ



## 手術台スカラ 撮影台 タイプ


撮影台と手術台、2つの機能を兼ね備えた手術台です。手術中に動物を移動することなく、撮影をすることができます。



カセットトレイのまわりは開放されているのでどこからでもコード類を通すことができます。

### Features of Products

### 製品の特徴

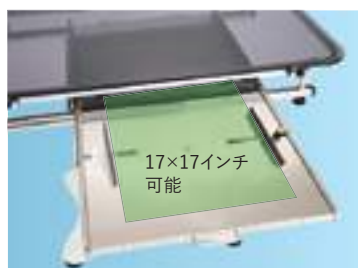

#### スライド式カセットトレイ

カセットトレイが左右に移動できるため、動物を移動することなく撮影をすることができます。

[カセットのサイズ]  
幅: 240～470mm  
奥行(最大): 470mm  
高さ(最大): 23mm

(上記のカセットサイズと異なる場合はご相談ください)



#### ロープホルダー

通常の手術台としても使用できるように、スライド式のロープホルダーとロープが標準装備されています。

(4個セット)



#### フルオープン天板

天板が開くため、カセットトレイなどに溜まる毛や埃の掃除が楽に行えます。



#### スモーク天板

天板はスモーク(薄いグレー)が入ったアクリル製です。擦りキズや汚れが目立ちにくく、標準で透明なビニールシートが付属されています。



OX-1100N-GS  
(チルト無)



OX-1100T-GS  
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名 手術台スカラ撮影台タイプ ガススプリング チルト 無 / 有							
OX-1100N-GS	W1100×D580	850～1100・250	46.2	ガススプリング	—	70.0	4582605330653
OX-1100T-GS	W1100×D580	940～1190・250	55.0	ガススプリング	右 20、左 20	70.0	4582605330660

付属品: スライド式ロープホルダー×4、ロープ×4、透明ビニールシート



OX-1100N-TM  
(チルト無)



OX-1100T-TM  
(チルト有)

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名 手術台スカラ撮影台タイプ 電動 チルト 無 / 有							
OX-1100N-TM	W1100×D580	550～950・400	51.0	電動 (AC100V 最大170W)	—	70.0	4582605330677
OX-1100T-TM	W1100×D580	640～1040・400	60.0	電動 (AC100V 最大170W)	右 20、左 20	70.0	4582605330684

付属品: スライド式ロープホルダー×4、ロープ×4、電源コード、フットスイッチ、透明ビニールシート

## リフトアップキャスター

標準装備されているアジャスターから、キャスターに変更することができます。ロックをするので、安定感があります。

## 手術台の移動に便利



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
リフトアップキャスター	全機種	W50×H60	70kg	4582605330486

## グリットガイド

カセットのグリットを差し込むガイドです。

グリットがカセットの出し入れに影響されない



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
グリットガイド	撮影台タイプ	—	—	4582605330783

## スカラ用チルト

チルトが付いていない手術台に、チルトを付けることができます。

## バージョンアップパーツ



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
スカラ用チルト	チルト無タイプ	W400×D335×H90	70kg	4582605330776

## 折り畳み式延長テーブル


天板サイズが200mm延長され、5段階で角度(0~90°)を変えることができます。

ジャックナイフポジションや天板の延長に



製品名	対応機種	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
折り畳み延長テーブル	撮影台タイプ	W580×D200	10kg	4582605330790

## 独自の臨床スタイルを 実現させるための多彩な オプションを完備

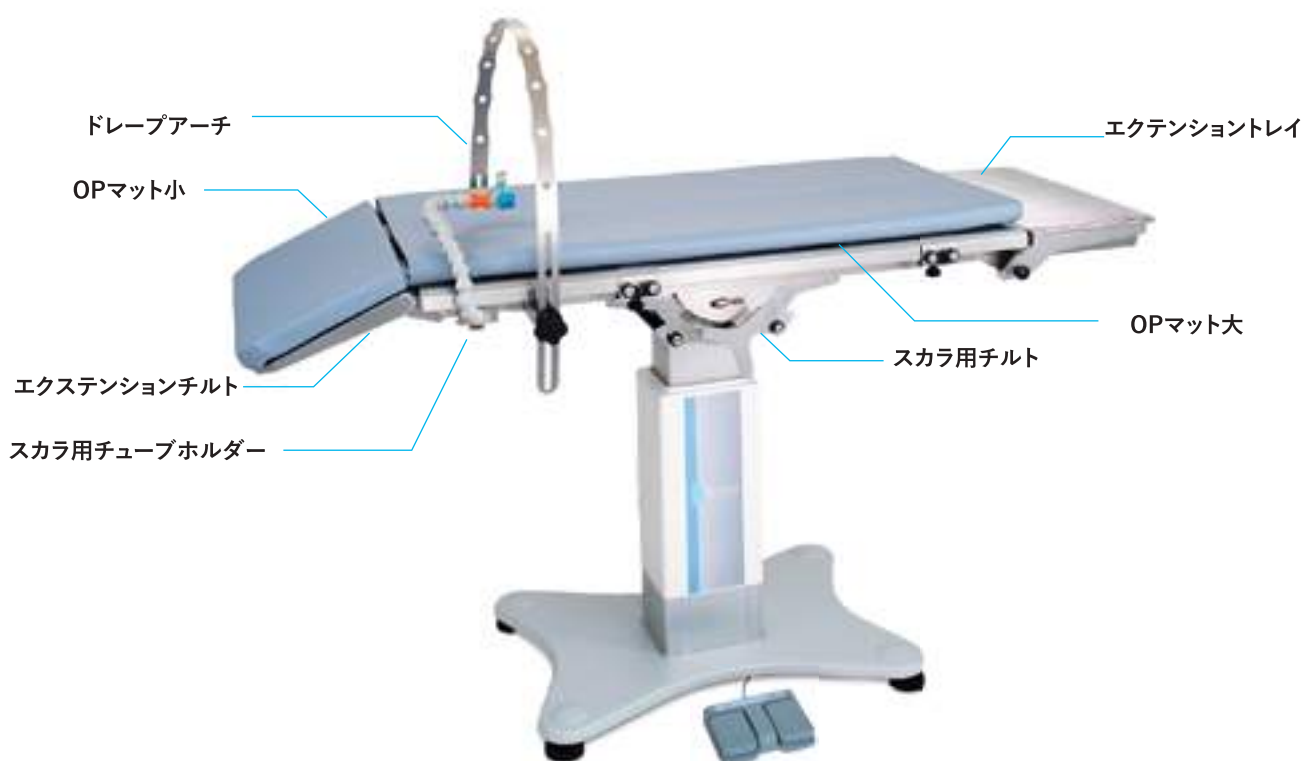




移動式処置台 × ストレッチャー

GSL  
ガススプリング  
昇降

安心  
2年保証

# SCALA VEHICLE

## スカラ ビークル

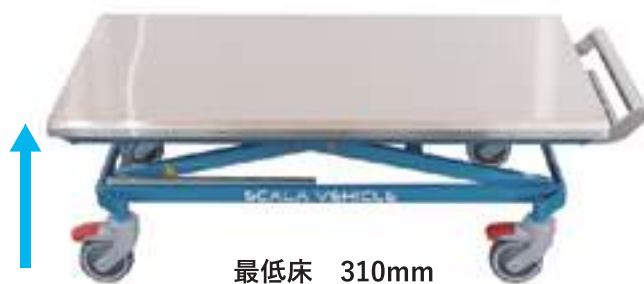

型番	天板 (mm)	本体サイズ (mm)	昇 降 (mm)	ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	最大積載量 (kg)	JANコード*
製品名	スカラビークル							
SV-1000-GS	W1000×D530	W1086×D530	H310～870	560	32	ガススプリング	40.0	4582605335382
付属品：サポートハンドル (1本)								


## Features of Products

## 製品の特徴



## オプションの共通化

昇降レバーと反対側は、スカラ用のオプションのエクステンションシリーズやサポートハンドルを取付けることができます。

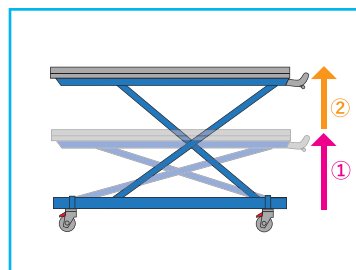

## 2段階昇降

操作ミスや事故を防ぐために、急激に昇降しないように途中で一回止まります。

【安全機能】



スカラビークルは、下記の手術台スカラ用のオプションが取り付け可能です。臨床現場に合わせて自由にカスタマイズしていただけます。

## OPTION 〈スカラビークル〉

## エクステンションチルト


UP1段、DOWN6段で角度の調整が可能。天板サイズを250mm延長します。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンションチルト	W510×D250	10kg	4582605330691

## エクステンショントレイ

器具置きやスケーラーの水受けに使用できます。トレイ、スノコは脱着式で溜まった水を処理できます。(トレイの容量4L)

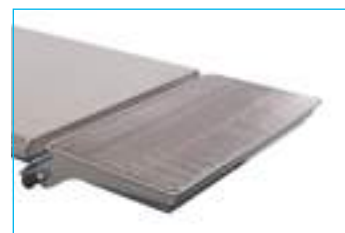

歯科処置等の水を使う作業

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンショントレイ	W510×D250	10kg	4582605330707

## エクステンションボード

固定式で天板サイズが250mm延長します。



天板サイズの延長に

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンションボード	W510×D250	10kg	4582605330714

## サポートハンドル

昇降レバーの反対側にも取付けることができます。昇降を両サイドでサポートできます。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
サポートハンドル	W390×D120×H75	—	4582605335450

## OPマット大

2重構造になっているため、マットヒーターを中に入れることができます。折り畳めるので保管がしやすく、裏面には滑り止め加工がされています。



ポジションの安定に

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
OPマット大	W1000×D500×H40	—	4582605330738

## OPマット小

エクステンションシリーズ用のOPマットです。固定ベルト付



エクステンションシリーズ用

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
OPマット小	W520×D260×H40	—	4582605330745

## クランプ式ロープホルダー・ロープ(2個セット)

天板の任意の位置に、取付けることができます



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
クランプ式ロープホルダー・ロープ(2個セット)	W62×D50×H70	—	4582605335474

## スカラビークル用ゴムシート

※リバーシブルゴムシート(ピンク&グレー)

天板の保護にご使用いただけます。滑り止め付。  
※クランプ式ロープホルダーで挟んでご使用ください。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
スカラビークル用ゴムシート	W1000×D510	—	4582605335665

オプション  
使用例



V型天板にOPマット大を敷いて  
動物を固定

オプション  
使用例



ドレープアーチは四肢を固定することにも  
使用できます。

Combination

## 設置例



# Veterinary Sink

## ベテリナリーシンク >>>>



手術室



処置室





# 2段式多機能シンク SW-120

2 段式  
スノコ

LHM  
ロング  
ホース混合栓


Full open  
ストレージ

Safety  
角面安全設計

Full Flat  
フルフラット

安心  
2 年保証

2段式スノコを活用することで、様々な使い方ができます。従来品より、収納スペースが広くなり、扉がフルオープンで開くため、使い勝手が向上しました。

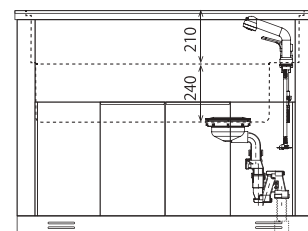

製品動画  
SW-120、BS-120  
SC-120 共通



型番	サイズ (mm)	シンク内寸・上段(mm)	シンク内寸・下段(mm)	重量 (kg)	材質	オーバーフロー	JANコード
製品名	2 段式多機能シンク						
SW-120	W1200×D580×H890	W1080×D460×H210	W940×D420×H240	61.6	SUS304	あり	4582605330820

付属品: ステンレススノコ(2枚)、シャワー付ストレート切替式ロングホース混合栓、薄型排水トラップ、フラット板、接続部品

## Features of Products


## 製品の特徴

【特許出願済】


### 2 段式スノコ

スノコの向きを変えることで、上段から中段に置くことができます。2層に分けて使用できるため、様々な使い方ができます。


2 段式  
スノコ

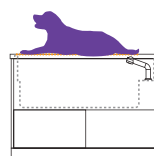


大型犬の処  
置。フラット板  
を使用します。

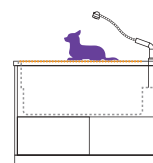

スノコを上段  
に敷いて、小  
型犬、猫、小  
動物に使用

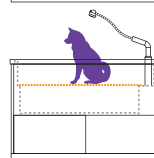

スノコを中段  
に敷いて、中  
型犬に使用

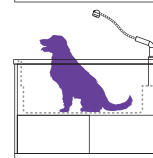


スノコを外し  
て、大型犬に  
使用



### フルオープン収納

折り戸の扉は、フルオープンになるため中が見やすく、狭いスペースでも開閉できます。従来品より、収納スペースが広くなり、底面がフラットのため、掃除が簡単です。

Full open  
ストレージ

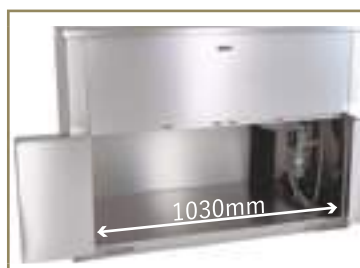

### ロングホース混合栓


専用シャワーホースはシンクの端までとどくので、水を流すときに便利です。

LHM  
ロング  
ホース混合栓

# ベーシックシンク

## BS-120

オーバーフロー付の深型の桶は、たっぷりと水が貯められますので薬浴、動物の処置、器具類の洗浄におすすめです。フルオープン収納やスノコを底面に敷けるなど、使い勝手が向上しました。

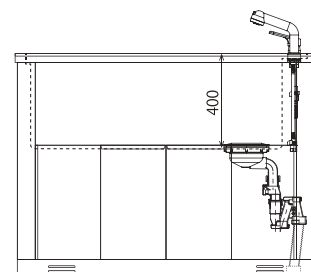

型番	サイズ (mm)	シンク内寸	重量 (kg)	材質	オーバーフロー	JANコード
製品名	ベーシックシンク					
BS-120	W1200×D580×H890	W1000×D460×H400	60.0	SUS304	あり	4582605330837

付属品：ステンレススノコ(2枚)、シャワー付ストレート切替式ロングホース混合栓、薄型排水トラップ、フラット板、接続部品

## Features of Products

### 製品の特徴



#### 底面スノコ


スノコの向きを90° 変えることで、シンクの底面に敷くことができます。動物を洗う際に水はけが良く、滑りにくくなります。

底面  
スノコ



#### 深型設計

シンクの桶の深さは、400mm があるため、たっぷりと水を溜めることができます。  
(オーバーフロー付)

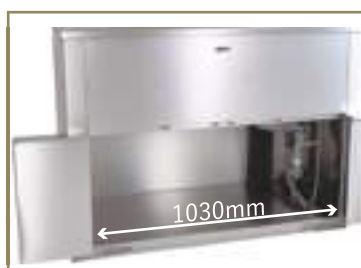

#### フルオープン収納

折り戸の扉は、フルオープンになるため中が見やすく、狭いスペースでも開閉できます。従来品より、収納スペースが広くなり、底面がフラットのため、掃除が簡単です。

Full open  
ストレージ



#### 角面安全設計

シンクの角を45度の角面にして、長時間、腕をあてても負担になりません。

Safety  
角面安全設計

# サージカルシンク

## SC-120

より高度な処置が行えるように開発されたサージカルシンクは、片側がオープンスペースになっているため、椅子に座っての作業や、メディカルペールなどを置くことができます。


Full Flat  
フルフラット

LHM  
ロング  
ホース混合栓

底面  
スノコ

Safety  
角面安全設計

安心  
2年保証

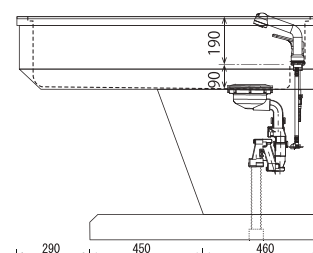

製品動画  
SW-120、BS-120  
SC-120 共通



型番	サイズ (mm)	シンク内寸・上段(mm)	シンク内寸・下段(mm)	重量 (kg)	材質	オーバーフロー	JANコード
製品名	サージカルシンク						
SC-120	W1200×D580×H890	W1080×D460×H190	W1000×D460×H90	46.0	SUS304	あり	4582605330844
付属品: ステンレススノコ(2枚)、シャワー付ストレート切替式ロングホース混合栓、薄型排水トラップ、フラット板、接続部品							

## Features of Products

### 製品の特徴



#### 座位作業が可能

片側がオープンになっているため、椅子に座って作業ができます。



#### シンクに寄り易い設計

シンクの下部が内側に傾斜しているため、シンクに寄り易い設計になっています。



#### 足元空間の有効活用

足元がオープンスペースになっているため、メディカルペールなどを置くことができます。



#### 底面スノコ


スノコの向きを90°変えることで、シンクの底面にスノコを敷くことができます。

底面  
スノコ

# 手術用手洗いシンク

## HW-100

コンパクトに設計された手洗いシンクは、本来の手を洗うためだけでなく独自の機能により多彩な用途に使用することができます。

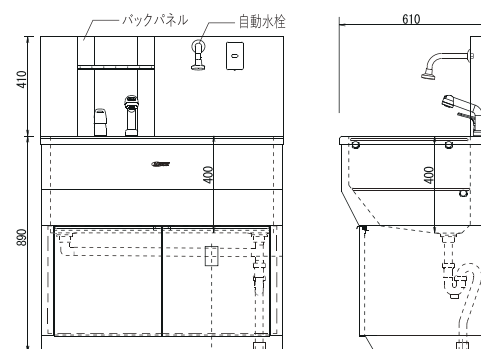

バックパネル(自動水栓)はオプションです

型番	サイズ (mm)	シンク内寸	重量 (kg)	材質	オーバーフロー	JANコード
製品名	手術用手洗いシンク					
HW-100	W1000×D610×H890	W920×D500×H400	43.0	SUS304	なし	4582605330851
付属品: ステンレススノコ(2枚)、シャワー付ストレート切替式ロングホース混合栓、排水ジャバラホース、接続部品						

## Features of Products

## 製品の特徴

【特許取得済】

### 2 段式スノコ (パイプ式)

上段、中段にスノコが置けるように、脱着式のパイプが桶につけられています。スノコを使用しない時は、桶の奥に立て掛けることも可能です。

2 段式  
スノコ



### コンパクト設計

設置しやすさを考えて、本体の幅を1000mmのコンパクトサイズに設計しました。



### フルオープン収納

シンクの下部は観音開きの収納になっています。底面がフラットのため、使い易く掃除が簡単です。

Full open  
ストレージ



### 充実のオプション

バックパネル、自動水栓、メイキャップミラーなどのオプションを揃えています。





## OPTION 〈ベテリナリーシンク〉

### 3way サイドプラス

回転することで、①トレイ、  
②延長板、③スプレーハンガー  
の3つの使い方ができます。  
(最大積載量:10kg)



### スプレーハンガー

スプレーやタオルなどが掛け  
られます。  
(最大積載量:10kg)



製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
3way サイドプラス	SW-120・BS-120・SC-120	W550×D250×H93	4582605330868

製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
スプレーハンガー	全機種	W250×D75×H45	4582605330875

### サイドトレイ

スケーラーや器具類を置くこと  
ができます。シンクトップのサイ  
ドに簡単に取り付けることがで  
きます。  
(最大積載量:10kg)



### シンク用クランプ式ロープ ホルダー、ロープ2個セット

レールを付けないで、シンクに  
取付けが可能です。



製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
サイドトレイ	全機種	W350×D250	4582605330967

製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
シンク用クランプ式ロープホルダー、ロープ2個セット	全機種	W65×D65×H55	4582605330899

### ウォールマウント メカノトレイ400セット

器具類を置くのに便利です。  
トレイは回転して、高さの調整  
をすることもできます。  
(最大積載量:10kg)



### 予備蛇口

予備蛇口を追加することで、ス  
ケーラーなどに使用できます  
(後付け不可)



製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
ウォールマウント メカノトレイ400セット	SW-120・BS-120・SC-120	W410×D120×H550	4582605330905

製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
予備蛇口	SW-120・BS-120・SC-120	W100×D50×H100	4582605334187

### クリップ付きチューブクランプ

チューブやコードをまとめたり、  
先端のクリップで様々な物を挟  
んで固定できます。



### 両面フルオープンドア

シンク下の収納の扉を両面に  
することで、両サイドから使用  
ことができます。  
※後付け不可



製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
クリップ付きチューブクランプ	全機種	W650×D115×H60	4582605330974

製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
両面フルオープンドア	SW-120・BS-120	W1040×D40×H470	4582605330929

### メイキャップミラー

手術前の着衣の確認ができ、  
ミラーの角度は無段階で角度  
調整が可能です。



### バックパネル・自動水栓

自動水栓は、手をかざすと自  
動で水がでます。



製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
メイキャップミラー	HW-100	W250×D33×H337	4582605330936

製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
バックパネル・自動水栓	HW-100	W1000×D70×H410	4582605330943

### シンク用ゴムシート


※リバーシブルゴムシート  
(ピンク&グレー)  
スノコの上に敷いて使用しま  
す。滑り止め付き。




製品名	対応機種	サイズ(mm)	JANコード
シンク用ゴムシート	SW-120・BS-120・SC-120	W900×D480	4582605335726

# 簡易配管図 (シンクには混合栓は取付けていません。配管工事の際に取付けてください。)


## ■ SW-120 / BS-120 共通 ■

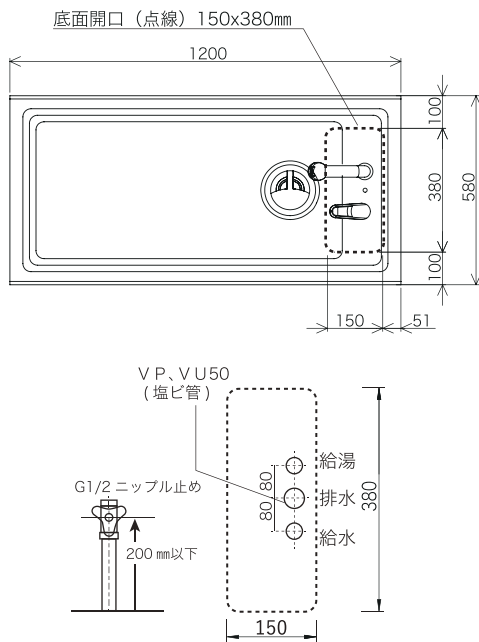


## ■ SC-120 ■

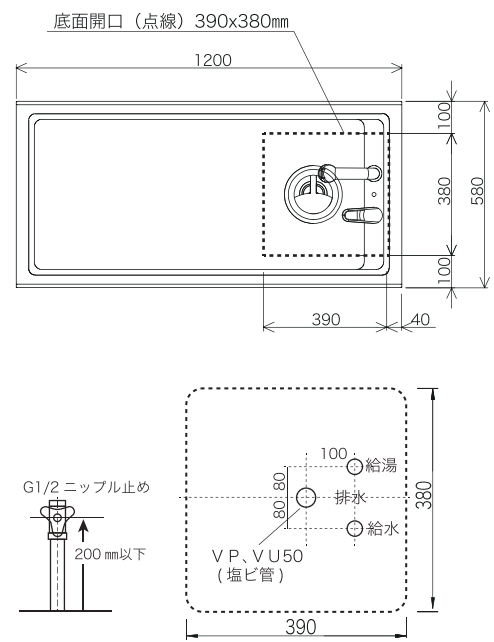

## ■ HW-100 / バックパネル有 ■

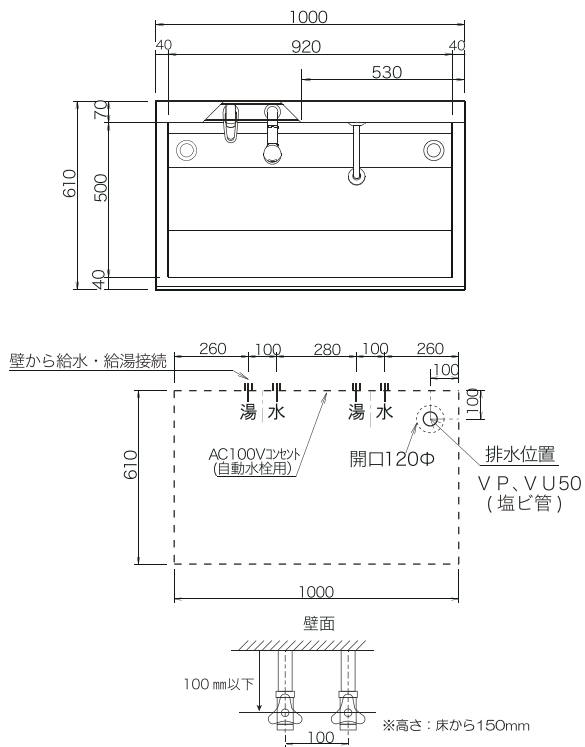

## ■ HW-100 / バックパネル無 ■

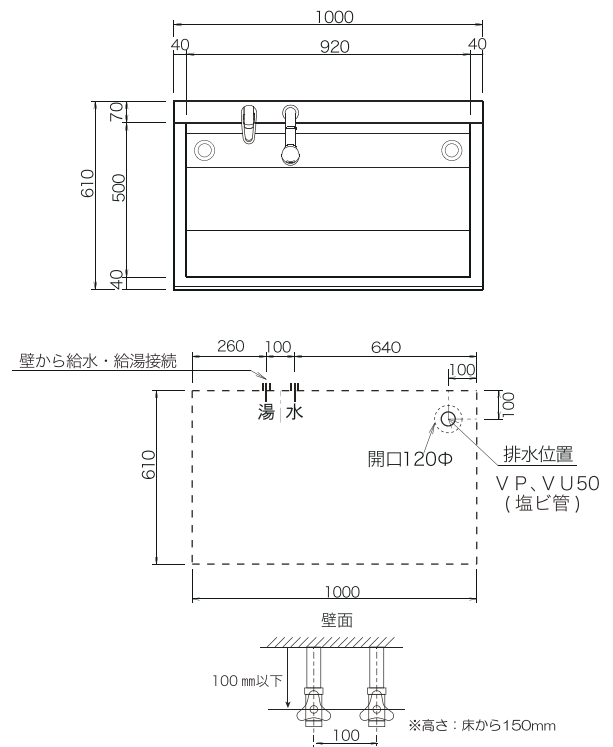

## 設置について

- 底面開口部に給水栓、給湯栓、排水管を設置してください
- シンクと床、壁面の接地面にコーキングをお願いします
- 排水管と排水ホースからの継目から臭気ガスが漏れないようにビニールテープ等でシーリングしてください。排水管からのガスでシンク本体内部が腐食する恐れがあります




※詳細な配管図はホームページからダウンロードできます。

# water table Dolphin

ウォーターテーブル ドルフィン

歯科・眼科に特化した処置台

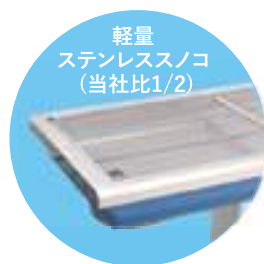

軽量  
ステンレスノコ  
(当社比1/2)

**EL**  
電動昇降

安心  
2年保証

**Safety**  
角面安全設計

**LS**  
ロングストローク

ドルフィン用シャワーキット  
(※オプション)

シャワーホルダー  
シャワーヘッド+ホース  
給水コック  
給水ホース



トップ部分がシンク状になっており、水を使用する処置に最適。ロングストローク電動昇降より、座位でもストレスなく処置が可能です。また、手術台、ベテリナリーシンクのオプションが共通して使用できるので、アレンジの幅が広がります。

製品動画



型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	シンク内寸 (mm)	重量 (kg)	昇降方式	最大消費電力	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名	ウォーターテーブル ドルフィン							
WT-1080N-TM	W1080×D540	570～970・400	W960×D420×H70	50.0	電動・AC100V～240V	170W	70.0	4582605335368

付属品：ステンレスノコ(2枚)、ジョイント、排水ホース、排水トラップ、電源コード、フットスイッチ、排水口ゴミ受け、防臭キャップ

※給水ホースは1.2mと4mを選択。4mの給水ホースを選択した場合のみ、ジョイントが付属します。

## Features of Products

## 製品の特徴

### Fitするデザイン

高さ  
座位・立位  
に対応

570～970mm


十分な距離

マイクロスコープ  
が使い易い



安全設計

膝や肘にやさしい

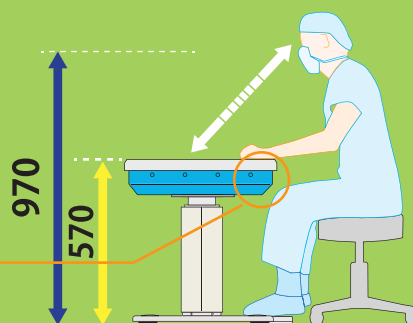

### ■V レールドレイン

水切れを良くするために、Vレールドレイン加工をしています。さらにシンク部分は薄型設計で足元空間を確保



### ■コンパクトシャワーヘッド

コンパクトで使いやすく、ヘッドにシャワーとバブルの切替ボタンが付いています。  
※ドルフィン用シャワーキット(オプション)の一部



(オプション)

### ■自己閉鎖膜の防臭・排水機能

排水時は自動で膜は開き、水の流れが止まると自動で膜が閉じるため、下水からのガスの侵入を防ぎます。



簡単メンテナンス

## OPTION 〈ウォーターテーブルドルフィン〉

※手術台スカラのオプションの一部が使用できます

## ドルフィン用シャワーキット

シャワーヘッド・ホース、シャワーホルダー、給水ホース、給水コックが一体化しています。吐水する場合は、給水コックを開きます。シャワーキットは任意の位置に取付けることができます。



製品名	サイズ(mm)	JANコード
ドルフィン用シャワーキット	—	4582605335351

## サイドトレイ

スケーラーや器具類を置くことができます。シンクトップのサイドに簡単に取付けることができます。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
サイドトレイ	W350×D250	10kg	4582605330967

## クリップ付きチューブクランプ

チューブやコードをまとめたり、先端のクリップで様々な物を挟んで固定できます。



製品名	サイズ(mm)	JANコード
クリップ付きチューブクランプ	W650×D115×H60	4582605330974

## エクステンションチルト

UP1段、DOWN6段で角度の調整が可能。天板サイズを250mm延長します。



ジャックナイフポジション、ヘッドアップポジション、天板延長に

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンションチルト	W510×D250	10kg	4582605330691

## エクステンションボード

固定式で天板サイズが250mm延長します。



天板サイズの延長に

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンションボード	W510×D250	10kg	4582605330714

## OPマット大

2重構造になっているため、マットヒーターを中に入れることができます。折り畳めるので保管がしやすく、裏面には滑り止め加工がされています。



ポジションの安定に

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
OPマット大	W1000×D500×H40	—	4582605330738

## ドルフィン用ゴムシート

※リバーシブルゴムシート（ピンク&グレー）  
天板の保護や滑り止めに使用できます。



製品名	サイズ(mm)	JANコード
ドルフィン用ゴムシート	W990×D450	458260533564

## スプレーハンガー

スプレーやタオルなどが掛けられます。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
スプレーハンガー	W250×D75×H45	10kg	4582605330875

## シンク用クランプ式ロープホルダー、ロープ2個セット

レールを付けなくて、シンクに取付けが可能です。



製品名	サイズ(mm)	JANコード
シンク用クランプ式ロープホルダー ロープ2個セット	W65×D65×H55	4582605330899

## エクステンショントレイ

器具置きやスケーラーの水受けに使用できます。トレイ、スノコは脱着式で溜まった水进行处理できます。（トレイの容量4L）



歯科処置等の水を使う作業

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
エクステンショントレイ	W510×D250	10kg	4582605330707

## OPマット小

エクステンションシリーズ用のOPマットです。固定ベルト付



エクステンションシリーズ用

製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
OPマット小	W520×D260×H40	—	4582605330745

## リフトアップキャスター

標準装備されているアジャスターから、キャスターに変更することができます。ロックをするリフトアップするので、安定感があります。



製品名	サイズ(mm)	最大積載量	JANコード
リフトアップキャスター	W50×H60	70kg	4582605330486




## オプション使用例



## 簡易配管図

### ■ WT-1080-TM ■

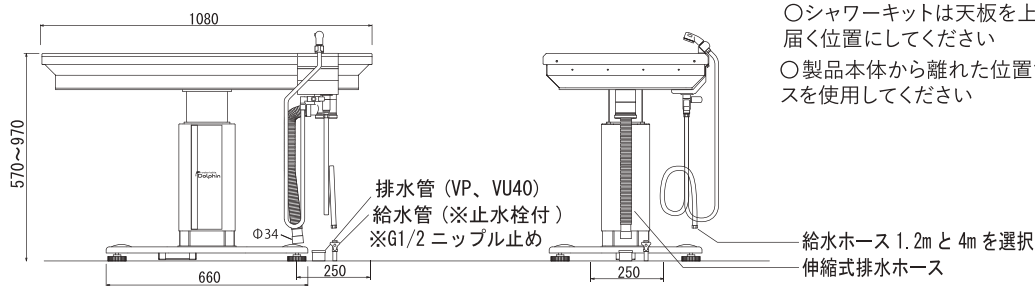

### 設置について

○排水管を立ち上げて、継目から臭気ガスが漏れないように、防臭キャップと排水ホースをシーリングしてください

### ドルフィン用シャワーキット(オプション)を使用する場合

- 給水管(※止水栓付)を立ち上げて、給水ホースを繋いでください
- シャワーキットは天板を上にした状態でも、給水ホースが届く位置にしてください
- 製品本体から離れた位置で給水する場合は4mの給水ホースを使用してください

## ユーザーレビュー

### ウォーターテーブル ドルフィン

#### 「とがさき動物病院」灰井康佑院長

非常に低床になるので動物の上げ下ろしが楽です。また、施術中でも術者の好みの高さに簡単に調整できる電動昇降は使いやすいと思います。排水ホースが簡単に外せて洗浄できたり、臭いの上がない小型排水システムは歯科処置や汚れたものを洗浄する際に実用性が高く、衛生的だと思います。大型犬を乗せる際に延長できるエクステンションチルトやサイドトレイなど痒い所に手が届くオプションが用意されており、カスタマイズして追加できるところも便利です。特に気に入ったのはサイドトレイで、左右に2個付けてもいいかもしれません。



とがさき動物病院 (埼玉県三郷市)

# Intensive Care Unit for animal 動物用 ICU >>>>



処置室



入院室



東京メニックスの次世代ICU

# MENIOS

メ ニ オ ス

省エネ  
e

3 ルーム  
独立制御  
ABC

トラブル  
Navi

大型犬対応



ICU- MENIOS(P)



ICU- MENIOS(B)

製品動画



動物用高度管理医療機器  
24動薬第1899号

型番	外寸 (mm)	重量 (kg)	電源	平均消費電力	最大消費電力	設定温度 (℃)	設定酸素濃度 (%)	カラー	JANコード
<b>製品名 ICU-MENIOS(B)、ICU-MENIOS(P)</b>									
ICU-V12	W1262×H1630×D723	178	AC100V 50/ 60Hz (アース付 3P)	0.7KW	1.5KW	15 ～ 35	21 ～ 50	ブルー ピンク	4582605330011 4582605330028

外寸には突起物は含まれていません

## Features of Products 製品の特徴

### ■大型タッチパネルと各種画面

8.4 インチの大型カラー液晶タッチパネルを搭載。抵抗膜方式で指やペンで操作が可能です。各ルームごとに色分けされ、温度、湿度、酸素濃度を表示。見やすくレイアウトされています。

### 各種画面の紹介(一部掲載)

メイン画面



トラブルナビ



メニュー画面



BCルームを一括管理 (49Pを参照)



### ■各種設定

温度、酸素濃度に加えて、除湿、換気は下記の3段階で設定が可能です。

- ・温度: 15~35°C
- ・酸素濃度: 21~50%
- ・除湿レベル: High / Middle / Low
- ・換気: High / Low / Stop

### ■優れた空調システム

A、B、C各ルームそれぞれに独立した、エアコンユニットを搭載。インバーター制御で省エネです。ルーム内は、動物に直接、風をあてないように、壁面を沿うように循環します。





## ■各部詳細

### ・ICUドア

大きくて握りやすいレバーロックハンドルは、軽い力で簡単にドアの開閉をすることができます。

ICUドアには、ネプライザー口、ドアベンチレーター（開閉式）、小窓、輸液バックやおやすみカーテンをかけられるスライドフックが付いています。



### ・着脱支柱とBCルーム

MENIOS独自の着脱支柱は、軽量で取り外しが簡単です。中央の仕切り板を外すことで、BルームとCルームが繋がり、BCルームとして使用できるので、大型犬の収容が可能になります。



### ・酸素供給口

コントローラーの上部には、酸素ボンベ用(P型 ピン方式)と酸素濃縮器用の2種類の酸素供給口と2つの排熱ファンがあります。



### ・ドアパッキン

ICUドアの黒いパッキンは弾力があるため、チューブを挟んでも潰れません。



### ・緊急ハッチ

電源をOFFにした時や、ICUが緊急停止した場合に、ルーム内の動物が酸欠状態にならないように、自動的に開きます。

※スリット内の換気孔が開きます。



### ・吸気フィルター

側面には、フィルターが2つあり、前面に引出して掃除をする事ができます。



### ・LEDライト

各ルームの上部には、動物をやさしく照らすLEDライトがついています。



### ・ドレンパン

エアコンの除湿した水を溜める容器が下に付いています。



次世代ICU

# MENIOS

## COMPACT

省エネ  
e2ルーム  
独立制御  
A Bトラブル  
Naviコンパクト  
900mm

動物用高度管理医療機器  
25動薬第2472号

型番	外寸 (mm)	重量 (kg)	電源	平均消費電力	最大消費電力	設定温度 (°C)	設定酸素濃度 (%)	JANコード
製品名 ICU-MENIOS COMPACT								
ICU-V13	W900×H1680×D723	141	AC100V 50/60Hz (7-ス付3P)	0.5KW	1.5KW	15 ~ 35	21 ~ 50	4582605330035

外寸には突起物は含まれていません

## ■各部詳細

### ・ICUドア

大きくて握りやすいレバーロックハンドルは、軽い力で簡単にドアの開閉をすることができます。ICUドアには、ネブライザー口、ドアベンチレーター（開閉式）、小窓、輸液パックやおやすみカーテンをかけられるスライドフックが付いています。



### ・Bルームの親子扉

親子扉の親扉は片手で開閉できるので動物の出し入れやお手入れが容易にできます。子扉は支柱一体型のため、支柱の取り外しを行わずにケージを全開放することができます。



### ・酸素供給口

コントローラーの上部には酸素ボンベ用（P型 ピン方式）と酸素濃縮器用の2種類の酸素供給口があります。



### ・ドアパッキン

ICUドアの黒いパッキンは弾力があるため、チューブを挟んでも潰れません。



### ・緊急ハッチ

電源をOFFにした時や、ICUが緊急停止した場合に、ルーム内の動物が酸欠状態にならないように、自動的に開きます。

※スリット内の換気孔が開きます。



### ・吸気フィルター

側面には、フィルターが2つあり、前面に引出して掃除をする事ができます。



### ・LEDライト

各ルームの上部には、動物をやさしく照らす、LEDライトがついています。



### ・ドレンパン

エアコンの除湿した水を溜める容器が下に付いています。



## OPTION 〈動物用 ICU〉

### マルチハンガー

ICUドア側面に取付けることで、輸液ポンプやWebカメラなどを取付けることができます。折り畳み可能です。



製品名	仕様	サイズ(mm)	JANコード
マルチハンガー	MENIOS / MENIOS COMPACT 全ルーム共通	W493×D25×H476	4582605330042

### 小窓用ノーマルドア

ICUドアの小窓を、ノーマルドアに交換することで通気性を確保することができます。



製品名	MENIOS			MENIOS COMPACT		サイズ(mm)	JANコード
	Aルーム	Bルーム	Cルーム	Aルーム	Bルーム		
小窓用ノーマルドアA・B用	○	○		○	○	W320×D15×H350	4582605335214
小窓用ノーマルドアC用			○			W320×D15×H350	4582605335221

### スライドポールハンガー NEW

ICUドア前面に取付けることで、輸液ポンプやシリンジポンプ、Webカメラなどを取付ける事で、左右にスライドすることができます。



製品名	MENIOS			MENIOS COMPACT		サイズ(mm)	JANコード
	Aルーム	Bルーム	Cルーム	Aルーム	Bルーム		
スライドポールハンガー M	○			○		W120×D120×H640	4582605330073
スライドポールハンガー L		○	○		○	W120×D120×H845	4582605330080

### ネブラライジング用カバー

ルーム上部のエアコンの吹出口/吸込口を塞ぐことでネブラライジングをすることができます。


注意:ネブラライジングはICUを停止してから行ってください



製品名	仕様	サイズ(mm)	JANコード
ネブラライジング用カバー	MENIOS / MENIOS COMPACT 全ルーム共通	W493×D358×H65	4582605330097

### 酸素コネクター

酸素濃縮器を2台で使用するためのコネクターです。逆止弁がついているため、1台で使用しても酸素は漏れません。

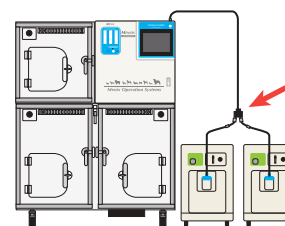

製品名	仕様	サイズ(mm)	JANコード
酸素コネクター	MENIOS / MENIOS COMPACT 共通	W30×D15×H200	4582605330103



## ICUスノコ

耐久性に優れたステンレス製です。格子のピッチが狭いので、動物に優しい設計になっています。



製品名	MENIOS			MENIOS COMPACT		サイズ(mm)	JANコード
	Aルーム	Bルーム	Cルーム	Aルーム	Bルーム		
ICUスノコ A	○			○		W527×D640×H30	4582605330110
ICUスノコ B		○				W575×D640×H30	4582605330127
ICUスノコ C			○			W575×D640×H30	4582605330134
ICUスノコ BW				○		W795×D640×H30	4582605330141

## フルサイズノーマルドア

通常のICUドアから、交換することで通気性が十分に確保され、入院ケージとして使用することができます。



製品名	MENIOS			MENIOS COMPACT		サイズ(mm)	JANコード
	Aルーム	Bルーム	Cルーム	Aルーム	Bルーム		
フルサイズノーマルドア A	○			○		W610×D70×H630	4582605330158
フルサイズノーマルドア B		○			○	W610×D70×H835	4582605330165
フルサイズノーマルドア C			○			W610×D70×H835	4582605330172

## ICUマット

クッション性と通気性に優れているため、ペットの床ずれを軽減してくれます。付属のマットカバー(灰色)は、撥水性で取り外して洗うことができます。



製品名	MENIOS			MENIOS COMPACT		サイズ(mm)	JANコード
	Aルーム	Bルーム	Cルーム	Aルーム	Bルーム		
ICUマット M	○	○	○	○		W550×D650×H40	4582605334170
ICUマット L					○	W820×D630×H40	4582605330189

## クリップ付ネームプレート

ホワイトボード素材なので、動物の情報を直接記入したり、クリップやマグネットでメモを貼ったり。スタッフ皆さまの情報共有ツールとして大変便利です。



製品名	仕様	サイズ(mm)	JANコード
クリップ付ネームプレート2枚	MENIOS / MENIOS COMPACT 全ルーム共通	W115×H185×D20	4582605335436






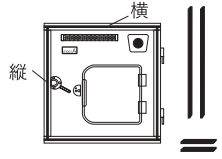
## おやすみカーテン

ICUドアのスライドフックに取付けることができます。フックの穴が、上下左右に付いているので折りたたんで、使用することもできます。



製品名	色	仕様	サイズ(mm)	JANコード
おやすみカーテンMENIOS(B)用	ブルー	Aルーム用、Bルーム用 Cルーム用各1枚	Aルーム用：W600×H590 Bルーム用：W600×H795 Cルーム用：W600×H795	4582605330196
おやすみカーテンMENIOS(P)用	ピンク			4582605330202
おやすみカーテンMENIOS COMPACT用	グリーン	Aルーム用1枚、Bルーム用1枚	Aルーム用：W600×H590、Bルーム用：W790×H790	4582605330219


## 消耗品

製品名	MENIOS			MENIOS COMPACT		簡易図	JANコード
	Aルーム	Bルーム	Cルーム	Aルーム	Bルーム		
メニオス用鉛フリー酸素センサー ※各ルーム1つ	○	○	○	○	○		4582605335733
メニオス用湿度センサー ※各ルーム1つ	○	○	○	○	○		4582605334316
メニオス用 紫外線ランプ・グロー球 ※各ルーム1set	○	○	○	○	○		4582605330233
メニオス用 ルーム内上部フィルター ※各ルーム1枚	○	○	○	○	○		4582605330240
メニオス用吸気フィルター ※本体側面に2枚	本体側面			本体側面		 1枚単位	4582605330257
メニオス用ドアパッキンA用縦2本	○			○			4582605330264
メニオス用ドアパッキンA用横2本	○			○			4582605330271
メニオス用ドアパッキンB・C用縦2本		○	○		○		4582605330295
メニオス用ドアパッキンB・C用横2本		○	○		○		4582605330288
コンパクト用ドアパッキンB用子ビラ縦1本、2個					○		4582605335207
コンパクト用ドアパッキンB用子ビラ横2本					○		4582605335191

## 設置環境について

### 設置についての注意事項

- 10℃～32℃の範囲内で空調管理された室内に設置してください。
- 本製品の上部には、排熱ファンで機械内部の熱を逃がせるように、**500 mm以上**の空間が必要です。
- 本製品は、吸気と扉の開閉のために壁面と**100 mm以上**の隙間をあけてください。
- 電源は、AC100V 20A の電力供給が必要です。
- 電源コードは、必ずアース付きのコンセントに接続してください。(1本)
- コンセントは、床からH1800 mmに設置してください。(推奨)
- 設置する床面は、水平で200kgの荷重に耐えられる強度が必要です。
- 直射日光が当たる場所には、設置しないでください。
- 本製品のコントローラー部(上部)には、物を置かないでください。(故障の原因になります)
- 酸素供給は酸素ポンプにはP型アウトレット、酸素濃縮器にはシリコンチューブで接続します。
- 酸素の天吊りアウトレットホースは、背面から650 mm位に取付けてください。(推奨)
- 設置搬入の際は、間口は750mm 以上が必要です。(750mm より狭い場合はご相談ください)

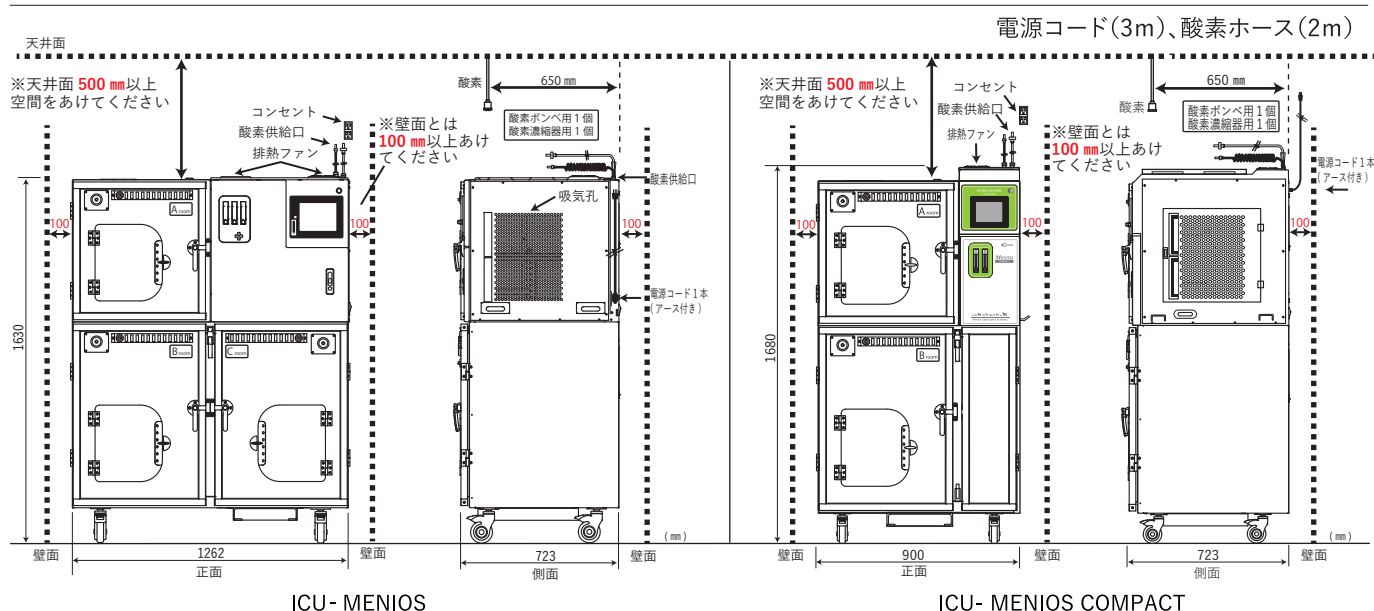

Doctors Collaboration

ドクターズコラボ >>>>



診察室



処置室



手術室





# Mechano Assist 3

メカノアシストスリー

# Mechano Assist 5

メカノアシストファイブ

日々進化を遂げている治療機器と  
その周辺資材を効果的にまとめるための  
医療トrolleyがメカノアシストです。  
衛生面と耐久性に優れたステンレス製の引出し  
は、セルフ&ソフトクローキング機構で閉まるため  
音が静かで収納物を痛めません。  
高性能ロックキャスターで移動も楽々。多彩な  
オプションパーツで機能を追加できます。



製品名	サイズ (mm)	引出し	収容量 (L)	重量 (kg)	材質	JANコード
<b>製品名 メカノアシスト 3、メカノアシスト 5</b>						
メカノアシスト 3	W450×D500×H925	3段	86	34	SUS304	4582605332480
メカノアシスト 5	W450×D500×H1235	5段	134	46	SUS304	4582605332497

付属品：作業ボード、ビニールマット、セパレーター-L470(1個)、セパレーター-L360(1個)、波トレ-100(1個)、波トレ-150(1個)

# Mechano Assist Plus

メカノアシスト プラス



メカノアシスト3にシェルフを付けることで  
メカノアシストプラスにバージョンアップ



製品名	サイズ (mm)	引出し	シェルフ	収容量 (L)	重量 (kg)	材質	JANコード
<b>製品名 メカノアシストプラス</b>							
メカノアシストプラス	W450×D500×H1600	3段	固定式1枚、スライド式1枚	86	50	SUS304	4582605332503

付属品：作業ボード、ビニールマット、セパレーター-L470(1個)、セパレーター-L360(1個)、波トレ-100(1個)、波トレ-150(1個)



## Features of Products

## 製品の特徴



## ボトルポケット

本体上部は、スプレーボトルなどを収納できるように、箱状のポケットになっています。



## スライド式作業ボード

スライド式の作業ボードは、脱着式の透明なアクリル板になっていますので、下にメモなどを挟むことができます。

## OPTION 〈メカノアシスト3・5、メカノアシストプラス〉

## コンセントユニット

機器の電源供給をまとめて、コードは下部に収納することができます。本体の右・左・背面に取付け可能です。



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
コンセントユニット	W305×D60×H450	1.9	4582605332510

## メカノトレイホルダー

メカノトレイを差し込むことができます。(メカノトレイは72ページ参照)



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
メカノトレイホルダー	W30×D65×H300	0.4	4582605332527

## タブレットホルダー

タブレットを固定することができます。(7～11インチ対応)



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
タブレットホルダー	W130×D150×H480	0.9	4582605332534

## カメラブーム

上方からビデオ撮影が可能になります。



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
カメラブーム	W970×D75×H850～1040	2.1	4582605332541

## 伸縮ハンガーポール

輸液バックなどを掛けることができます。高さ調整可能です。



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
伸縮ハンガーポール	W145×D35×H430～670	0.8	4582605332558

## セパレーター

引出しを任意の位置で仕切ることができます。

縦用:セパレーター-L470

横用:セパレーター-L370



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
セパレーター-L470	W90×D470×H100	0.5	4582605332596
セパレーター-L370	W90×D370×H100	0.4	4582605332589

## 波トレイ

引出しの上部と下部にトレイを置くことができます。トレイは連結可能です。



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
波トレイ-150	W373×D180×H40	0.5	4582605332572
波トレイ-100	W373×D130×H40	0.4	4582605332565

# Mechano

## メカノダイナミックシステムズ

動物医療が高度に成長した現在  
臨床現場に求められる  
質の高い医療をするためには  
「作業動線」「医療効果」「多能化」の3つの  
キーワードが重要であると考えました。  
その3つのキーワードから生まれた  
「メカノダイナミックシステムズ」とは  
メカノ本体に、16種類のディバイスを  
組み合わせることで、ご希望の機能を持った  
器具台にすることができます。



### メカノ本体

各種ディバイスを取付ける本体。ガススプリングで上下に  
昇降します。カウンターバランスで本体を安定させ、高性  
能キャスター(ロック付)でスムーズに移動できます。



製品名	サイズ(mm)	重量(kg)	JANコード
メカノ本体	W640×D460×H810~1160	16.5	4582605332312



使用例は  
Webサイト  
をご覧ください



## Device

### メカノトップテーブル

テーブルが360度回転し、自  
由な位置で固定できます。



### メカノサイドテーブル

主にサイドクランプに差し込  
んで使用します。便利なスライ  
ド機能が付いています。

(スライド:145mm)



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノトップテーブル	W700×D400×H45	10	5.5	4582605332329

製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノサイドテーブル	W500×D400×H45	10	3.7	4582605332336

### メカノサクション台

メカノ本体のベースに差し込  
んで、サクションを置くことが  
できます。



### メカノサイドクランプ

メカノ本体の支柱に取付け  
て、サイドテーブルなどを自由  
な高さで取付けることができ  
ます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノサクション台	W420×D240×H45	10	2.1	4582605332343

製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノサイドクランプ	W364×D175×H55	10	1.5	4582605332350

※テーブルの高さは、立ち上がりサイズになります。



## メカノジョイントクランプ

サイドクランプなどに差し込むことで、テーブルの可動範囲を広げることができます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノジョイントクランプ	W260×D160×H90	10	1.1	4582605332367

## メカノトレーR500

円形テーブルのため、360度あらゆる角度から、アプローチできます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノトレーR500	W500×D500×H40	10	3.9	4582605332381

## メカノトレーR300

円形テーブルのため、360度あらゆる角度から、アプローチできます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノトレーR300	W300×D300×H40	10	2.0	4582605332404

## メカノバット

スケーリングの水受けなどの用途で使います。トップテーブルやサイドテーブルに収まる大きさです。(スノコ付)



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノバット	W420×D310×H40	10	2.0	4582605332428

## メカノバランサー

ハンガーボールに引っ掛けて四肢の牽引をすることができます。(ストローク1500mm)



製品名	サイズ(mm)	容量(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノバランサー	W90×D60×H260~1760	1~2	0.38	4582605332442

## メカノマルチポトルラック

ハンガーボールに取り付けて、複数の輸液バックなどと吊下げることができます。オートクレープをする際に折り畳むことができます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノマルチポトルラック	W400×D400×H40	10	0.5	4582605332466

## メカノオフセットクランプ

メカノ本体の側面に取付けるクランプです。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノオフセットクランプ	W315×D195×H60	10	2.28	4582605332374

## メカノトレーR400

円形テーブルのため、360度あらゆる角度から、アプローチできます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノトレーR400	W400×D400×H40	10	2.7	4582605332398

## メカノラインホルダー

チューブやコード類をまとめて、落下を防止します。テーブルの立ち上がりに取り付けます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノラインホルダー	W120×D40×H80	—	0.2	4582605332411

## メカノハンガーボール

四肢の牽引や輸液バックを掛けたり、様々な用途でご使用いただけます。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノハンガーボール	W425×D35×H1200	10	1.4	4582605332435

## メカノカメラマウント

ハンガーボールにカメラを取り付けるときに使用します。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノカメラマウント	W610×D40×H474	—	1.5	4582605332459

## メカノスタンディングラテラル

X線のカセットホルダーです。ホルダーは90度回転することができます。立位の撮影に最適です。



製品名	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	JANコード
メカノスタンディングラテラル	W260×D900×H325~406	10	3.4	4582605332473

※メカノトレーの高さは、立ち上がりのサイズになります

# LAPARO CRADLE

ラパロクレドル



## 【特長】

- ・お使いの術台に載せて、ご使用いただけます。
- ・電動横転動作をスムーズに行えます。(バッテリー式)
- ・横転角が90度以上あるので、大きく角度を付けて臓器を寄せることが可能です。
- ・腹部術野を妨げない特殊形状で、無理なく理想の術的アプローチが可能になります。
- ・四肢保定用アームは体形に合わせて任意の位置にセットできます。
- ・コンパクトに縮めるので、一人で持ち運びできます。



動物の大きさに合わせて調節



チルト機能：90度

製品名	サイズ(mm)	天板サイズ(mm)	重量(kg)	チルト機能	電源	JANコード
製品名 ラパロクレドル						
ラパロクレドル	W690～1140×D610×H290	W613～913×D170	8.5	90度(無段階)	DC24V バッテリー式 (ニッケル水素)	4582605332640
付属品：ロープホルダー4個、ロープ4本、ハンドスイッチ、充電器 オプション：温風用ヒーターマット[JANコード：4582605334248]						

# TWIN PILLAR

ツインピラー

## 大型天板電動昇降器具台

充電バッテリー式



本格的な外科手術や鏡視下手術向けの大型天板電動昇降器具です。安定感のあるガントリータイプなので、術台にかぶせて使用できます。昇降ボタンは滅菌布の上から操作ができます。



昇降ボタン(防水仕様)  
背面サイドに付いています。



製品名	サイズ(mm)	ストローク(mm)	耐荷重(kg)	重量(kg)	電池	充電時間	付属品	JANコード
製品名 ツインピラー								
ツインピラー	W1020×D550×H800～1300	500	80.0	40.0	リチウムイオン バッテリー	約5時間(40回昇降)	充電器	4582605332602



# Tracheal Tubu Case

トラキアルチューブケース

- ・気管チューブをサイズ別に収納する便利ケース
- ・喉頭鏡やスタイレットの保管もできます
- ・フタ付きなので、清潔に保管できます
- ・1つの溝に、3つまで保管できます



中段トレイ



使用イメージ



フック部に滑り止め加工

製品名	サイズ (mm)	フックの溝の幅・外径 (mm)	材質	重量 (kg)	JANコード
製品名 トラキアルチューブケース					
トラキアルチューブケース	W600×D120×H600	3.3mm~16.3mm [1mmきざみ 14個]	本体: ステンレス (SUS304) フタ: ポリカーボネート (スモーク)	7.9	4582605334453
付属品: 取付ネジ					

## YAMORI

ヤモリ

### [ポータブル輸液スタンド]

- ・便利な折り畳み式
- ・輸液が必要なとき、必要な場所へ
- ・コンパクトで邪魔になりません



使用イメージ

製品名	サイズ (mm)	折り畳みサイズ (mm)	重量 (kg)	材質	JANコード
製品名 ヤモリ					
ヤモリ	W400×D350×H630	W75×D75×H455	0.7	ステンレス (SUS304)	4582605334460

# SURGICAL ROBOT

シンクタイプ天板

- ・前後傾斜・左右傾斜機能
- ・平行昇降機能
- ・水平リミット機能
- ・臨床現場が求める軽量感と自在性



使用イメージ



ハンドリモコン



ダブルチルト



前後傾斜(天板)



スノコを外した状態

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	天板前後傾斜角度 (度)	最大積重量 (kg)	JANコード
製品名	サージカルロボット シンクタイプ天板							
SR-1300-S	W1300×D560	690～990・300	70.0	電動・24Vバッテリー駆動 (ニッケル水素)	右 20、左 20	片側最大 20	50.0	4582605330806
付属品: フラットスノコ、ロープホルダー×4、ロープ×4、アジャスター、ハンドリモコン、電源コード						オプション: ドレープハンガー、チューブホルダー		



# SURGICAL ROBOT

透視タイプ天板

- ・前後傾斜・左右傾斜機能
- ・平行昇降機能
- ・水平リミット機能
- ・臨床現場が求める軽量感と自在性

Cアーム対応



使用イメージ



ハンドリモコン

天板サポート  
(伸縮式)

天板を回転した際に横転を防ぐための、天板サポートが標準装備されています。



ダブルチルト



前後傾斜機能



360度回転

型番	天板 (mm)	昇降・ストローク (mm)	重量 (kg)	昇降方式	チルト機能 (度)	天板前後傾斜角度 (度)	最大積載量 (kg)	JANコード
製品名	サージカルロボット 透視タイプ天板							
SR-1300-T	W1300×D560	690～990・300	70.0	電動・3MV バッテリー駆動 (ニッケル水素)	右 20、左 20	片側最大 20	50.0	4582605330813
付属品: ロープホルダー×4、ロープ×4、アジャスター、ハンドリモコン、電源コード、天板サポート						オプション: ドレープハンガー、チューブホルダー		

## ドクターズコラボとは？

獣医師と弊社の開発チームがコラボレーションして開発した製品になります。

動物医療が高度に成長した現在、臨床現場に求められる質の高い医療をするために獣医師のご意見を伺い、実際に臨床現場で検証しながら、製品開発を行ってきました。様々な臨床現場にも対応できるように、数多くのデバイスとオプションを開発しましたので、ご満足いただけると思います。



### 設置例

Combination



メカノアシスト



メカノダイナミックシステムズ



メカノダイナミックシステムズ+サージカルロボット



サージカルロボット



# Additional Devices

補助機器 >>>>



手術室



処置室



# ベテリナリーチェア

NEW

GSL  
ガススプリング  
昇降

獣医療のためのチェア



## 背もたれ

人間工学に基づいたデザインの背もたれは、一体成型された高密度発泡のポリウレタンで覆われたスチール構造のため、丈夫でお手入れが簡単です。

## 座面

座面はスチールをベースにした高強度の合成スポンジをポリウレタン製の人工皮革で覆っているため、耐久性が高く弾力性に優れています。

## 支柱

支柱は耐久性に優れたドイツ製のガスバネを採用しており、無段階の昇降が可能です。

## 脚部

円形の脚部は高強度のアルミニウムに5輪のポリウレタン製キャスターが装備されており、静粛性と安定性に優れています。

型番	サイズ (mm)	昇降方式	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	JANコード
製品名	ベテリナリーチェア				NEW
VC-39	座面Φ390×D520×H520～720	ガススプリング	100	13.5	4582605335481

製品動画



## Features of Products

### 製品の特徴



### 背もたれ

360°回転のギミックにより、肘置きにもなるので、細かい作業の際の手ブレを防ぎます。



### 円形フットペダル

ステンレス製の円形フットペダルが装備されており、360°どの位置でも昇降操作が可能です。

## 器具台

ワンタッチで高さ調整可能



型番	サイズ (mm)	昇降方式	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	JANコード
製品名 器具台					
OT(B)	W900×D450×H900～1250	ガススプリング	10	24.0	4582605332657

## 万能テーブル

手動  
Manual手術台スカラのオーバーテーブル  
としてご使用頂けます

型番	サイズ (mm)	昇降方式	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	JANコード
製品名 万能テーブル					
OT-TS(h)	W900×D450×H815～1215	手動	10	20.0	4582605332664

# STRETCHER

電動ストレッチャー

充電バッテリー式

- ・大型犬の移動も楽々
- ・スイッチ操作で簡単昇降



昇降ボタン




型番	サイズ (mm)	昇降方式	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	電池	充電時間	JANコード
製品名 電動ストレッチャー							
ES-1000	W1060×D500×H320～970	電動昇降	50	34.4	ニッケル水素	AC100V 約8時間	4582605332626
付属品:リバーシブルゴムシート、固定バンド、充電器				オプション:点滴ハンガー[JANコード:4582605334194]			



# Animal Necker



処置室

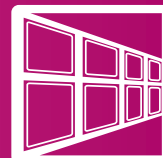

入院室

## アニマルネッカー >>>>



# 金属ホック ブルー



厚みがあり丈夫です  
視界を遮る処置に有効



サイズ	首回り (cm)	外回り (cm)	長さ (cm)	重さ (g)	適応犬種	JANコード 1枚	JANコード 5枚set
製品名	金属ホック ブルー						
SS	17 ~ 20	56 ~ 65	10	47	子猫・チワワ	4582605332718	4582605333029
Cat	19 ~ 23	57 ~ 67	12	54	子猫・ヨークシャーテリア	4582605332725	4582605333012
S	22 ~ 24	82 ~ 91	13	70	猫・マルチーズ	4582605332749	4582605332992
Cat L	27 ~ 30	87 ~ 96	13	75	猫 (大型)・パグ	4582605332732	4582605333005
M	27 ~ 30	96 ~ 106	15	80	ペキニーズ	4582605332756	4582605332985
L	30 ~ 36	109 ~ 122	17	114	柴犬	4582605332763	4582605332978
2L	35 ~ 43	123 ~ 139	19	142	ビーグル	4582605332770	4582605332961
3L	35 ~ 40	115 ~ 130	22	154	アフガン、シェルティ	4582605332787	4582605332954
4L	40 ~ 46	108 ~ 124	25	182	ダルメシアン、紀州犬	4582605332794	4582605332947
5L	41 ~ 46	122 ~ 138	30	232	レトリバー、ハスキー	4582605332800	4582605332930
ツインネッカー	51 ~ 56	144 ~ 162	32	302	グレートピレニーズ	4582605332817	4582605332923
SN-1	13 ~ 21	44 ~ 57	13	46	チワワ、トイプードル	4582605332824	4582605332916
SN-2	21 ~ 29	55 ~ 74	16	75	ミニチュアダックス	4582605332831	4582605332909
SN-3	22 ~ 32	66 ~ 91	21	114	ダックス、イタリアングレイハウンド	4582605332848	4582605332893
SN-4	25 ~ 37	82 ~ 112	27	180	アイリッシュテリア、ダルメシアン	4582605332855	4582605332886
SN-5	30 ~ 43	98 ~ 134	33	234	サモエド、ドーベルマン	4582605332862	4582605332879

# 金属ホック クリア



透明で視界良好



サイズ	首回り (cm)	外回り (cm)	長さ (cm)	重さ (g)	適応犬種	JANコード 1枚	JANコード 5枚set
製品名	金属ホック クリア						
SS	17 ~ 20	56 ~ 65	10	40	子猫・チワワ	4582605333036	4582605333197
Cat	19 ~ 23	57 ~ 67	12	46	子猫・ヨークシャーテリア	4582605333043	4582605333203
S	22 ~ 24	82 ~ 91	13	60	猫・マルチーズ	4582605333067	4582605333234
Cat L	27 ~ 30	87 ~ 96	13	64	猫 (大型)・パグ	4582605333050	4582605333227
M	27 ~ 30	96 ~ 106	15	74	ペキニーズ	4582605333074	4582605333241
L	30 ~ 36	109 ~ 122	17	93	柴犬	4582605333081	4582605333258
2L	35 ~ 43	123 ~ 139	19	114	ビーグル	4582605333098	4582605333265
3L	35 ~ 40	115 ~ 130	22	122	アフガン、シェルティ	4582605333104	4582605333272
4L	40 ~ 46	108 ~ 124	25	168	ダルメシアン、紀州犬	4582605333111	4582605333289
5L	41 ~ 46	122 ~ 138	30	214	レトリバー、ハスキー	4582605333128	4582605333296
ツインネッカー	51 ~ 56	144 ~ 162	32	278	グレートピレニーズ	4582605333135	4582605333302
SN-1	13 ~ 21	44 ~ 57	13	38	チワワ、トイプードル	4582605333142	4582605333319
SN-2	21 ~ 29	55 ~ 74	16	61	ミニチュアダックス	4582605333159	4582605333326
SN-3	22 ~ 32	66 ~ 91	21	93	ダックス、イタリアングレイハウンド	4582605333166	4582605333333
SN-4	25 ~ 37	82 ~ 112	27	154	アイリッシュテリア、ダルメシアン	4582605333173	4582605333340
SN-5	30 ~ 43	98 ~ 134	33	218	サモエド、ドーベルマン	4582605333180	4582605333357

# 金属ホック ソフトエッジ



ソフトな使い心地



サイズ	首回り (cm)	外回り (cm)	長さ (cm)	重さ (g)	適応犬種	JANコード 1枚	JANコード 5枚set
製品名	金属ホック ソフトエッジ						
SS	17 ~ 20	56 ~ 65	10	45	子猫・チワワ	4582605333432	4582605333456
Cat	19 ~ 23	57 ~ 67	12	52	子猫・ヨークシャーテリア	4582605333425	4582605333463
S	22 ~ 24	82 ~ 91	13	66	猫・マルチーズ	4582605333449	4582605333470
Cat L	27 ~ 30	87 ~ 96	13	73	猫 (大型)・パグ	4582605333418	4582605333487
M	27 ~ 30	96 ~ 106	15	81	ペキニーズ	4582605333401	4582605333494
SN-1	13 ~ 21	44 ~ 57	13	43	チワワ、トイプードル	4582605333395	4582605333500
SN-2	21 ~ 29	55 ~ 74	16	67	ミニチュアダックス	4582605333388	4582605333517
SN-3	22 ~ 32	66 ~ 91	21	102	ダックス、イタリアングレイハウンド	4582605333371	4582605333524
SN-4	25 ~ 37	82 ~ 112	27	164	アイリッシュテリア、ダルメシアン	4582605333364	4582605333531
SN-5	30 ~ 43	98 ~ 134	33	228	サモエド、ドーベルマン	4582605333210	4582605333548

# プチホック クリア



軽量でお求めやすい価格



サイズ	首回り (cm)	外回り (cm)	長さ (cm)	重さ (g)	適応犬種	JANコード 1枚	JANコード 5枚set
製品名	プチホック クリア						
3S	15 ~ 18	49 ~ 57	9	14	子猫・小犬	4582605333562	4582605333869
SS	17 ~ 20	56 ~ 65	10	26	子猫・チワワ	4582605333555	4582605333852
Cat	19 ~ 23	57 ~ 67	12	32	子猫・ヨークシャーテリア	4582605333593	4582605333838
S	22 ~ 24	82 ~ 91	13	46	猫・マルチーズ	4582605333579	4582605333814
Cat L	27 ~ 30	87 ~ 96	13	51	猫 (大型)・パグ	4582605333708	4582605333821
M	27 ~ 30	96 ~ 106	15	60	ペキニーズ	4582605333586	4582605333807
L	30 ~ 36	109 ~ 122	17	78	柴犬	4582605333609	4582605333791
2L	35 ~ 43	123 ~ 139	19	100	ビーグル	4582605333616	4582605333715
3L	35 ~ 40	115 ~ 130	22	108	アフガン、シェルティ	4582605333623	4582605333845
4L	40 ~ 46	108 ~ 124	25	144	ダルメシアン、紀州犬	4582605333630	4582605333784
5L	41 ~ 46	122 ~ 138	30	188	レトリバー、ハスキー	4582605333647	4582605333777
SN-1	13 ~ 21	44 ~ 57	13	31	チワワ、トイプードル	4582605333654	4582605333760
SN-2	21 ~ 29	55 ~ 74	16	49	ミニチュアダックス	4582605333661	4582605333753
SN-3	22 ~ 32	66 ~ 91	21	75	ダックス、イタリアングレイハウンド	4582605333678	4582605333746
SN-4	25 ~ 37	82 ~ 112	27	136	アイリッシュテリア、ダルメシアン	4582605333692	4582605333739
SN-5	30 ~ 43	98 ~ 134	33	184	サモエド、ドーベルマン	4582605333685	4582605333722
デスクタイプ	16 ~ 20	55 ~ 67	11	20	子猫・小犬	—	4582605333951

※デスクタイプは、乳白半透明な素材になります。

# プチホック ソフトエッジ




軽量でソフトな使い心地



サイズ	首回り (cm)	外回り (cm)	長さ (cm)	重さ (g)	適応犬種	JANコード	JANコード
製品名	プチホック ソフトエッジ					1枚	5枚set
3S	15～18	49～57	9	18	子猫・小犬	4582605333982	4582605333999
SS	17～20	56～65	10	32	子猫・チワワ	4582605333975	45826053334002
Cat	19～23	57～67	12	38	子猫・ヨークシャーテリア	4582605333968	4582605334019
S	22～24	82～91	13	53	猫・マルチーズ	4582605333944	4582605334026
Cat L	27～30	87～96	13	57	猫 (大型)・パグ	4582605333937	4582605334033
M	27～30	96～106	15	68	ペキニーズ	4582605333920	4582605334040
SN-1	13～21	44～57	13	35	チワワ、トイプードル	4582605333913	4582605334057
SN-2	21～29	55～74	16	57	ミニチュアダックス	4582605333906	4582605334064
SN-3	22～32	66～91	21	81	ダックス、イタリアン 그레이ハウンド	4582605333890	4582605334071
SN-4	25～37	82～112	27	146	アイリッシュテリア、ダルメシアン	4582605333883	4582605334088
SN-5	30～43	98～134	33	192	サモエド、ドーベルマン	4582605333876	4582605334095

## すぐテープ マジックテープ仕様

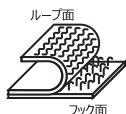

- 首回りの微調節が可能
- 瞬時に装着が可能
- 装着時の音の軽減




サイズ	首回り (cm)	外回り (cm)	長さ (cm)	重さ (g)	適応犬種	JANコード	JANコード
製品名	すぐテープ					1枚	5枚set
Cat	17～20	56～65	10	32	子猫・ヨークシャーテリア	4582605334101	4582605334132
Cat L	19～23	57～67	12	51	猫 (大型)・パグ	4582605334118	4582605334125

※マジックテープのみの販売はしていません

## 特徴のある製品について

### ツインネッカー


保管に便利な2分割式  
金属ホック(ブルー・クリア)のみ

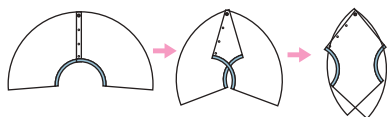

超大型犬用

### スリムネッカー

首が細くて、顔が長い犬に最適  
全5種類: SN-1、SN-2、SN-3  
SN-4、SN-5

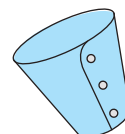



金属ホック			プチホック	
ブルー	クリア	ソフトエッジ	クリア	ソフトエッジ

## アニマルネッカーの保管上の注意とお願い


- ・保管状態により、未使用でも品質が劣化する場合があります。
- ・直射日光、極端な高温と低温は避け、平らな状態で保管願います
- ・現像室や塩素系薬品を使用する部屋では、金属ホックが腐食する場合があります。
- ・本製品は消耗品につき、ご使用後の返品・交換はご容赦願います。

## ネッカーの素材について

- ・ペットに傷を生じさせないために、比較的やわらかい素材を使用していますので輸送中のスレ等で製品にキズが発生することがありますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。

金属ホック	プチホック	板材	首回り
真鍮ニッケル	ポリプロピレン	ポリプロピレン	ポリウレタン

## サイズの表記について

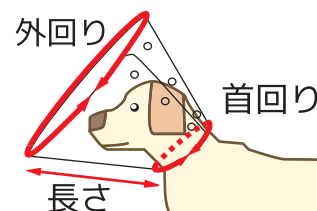

## ネッカーのしっぽ

これは、便利！

製品の金属ホックにネッカーを直接取付けて収納します。

金属ホック専用



製品名	サイズ(mm)	収納数	JANコード
ネッカーのしっぽ	W130×H620	最大10枚	4582605334149

天然素材使用  
**niowa:zu**  
ニオワーズ

空気中に散布しても効果がありますが尿や糞を拭き取り後に、スプレーすると臭いが瞬間分解します。

(香料で臭いを包み込む方法と異なります)



2本購入すると、専用スプレーボトルを1本サービス

製品名	サイズ(mm)	希釈	JANコード
ニオワーズ	1000ml 業務用濃縮タイプ	2〜3倍	4582605334163

## Necker Box

ネッカー ボックス

段ボール製のボックスの中に、3枚の中仕切ファイルが入っています。

3L・SN-3まで対応



製品名	サイズ(mm)	収納数	JANコード
ネッカーボックス	W670×H570×D200	30枚程度	4582605334156

## 製品動画のご紹介

東京メニックスでは、文字と静止画だけで伝えていた製品の情報を動画化しています。製品を実際に使っている様子を見ることで製品の理解を早め、動画を通して、「自分が使ったらこんな風になるのか」とイメージを膨らませることができると考えています。



製品動画一覧

### ■ 診察台アドバンス

東京メニックスから新しい診察スタイルの提案。業界初の電動昇降式デスク型診察台。足元スッキリでストレスフリー。昇降範囲も広く、適格なポジションで診察ができます。体重計表示とスイッチが一体化して、使い易くなりました。

収納に便利な引出しは、小物からキーボードなどが入ります。




### ■ スカラビークル

コンパクトな天板と軽量設計で操作性に優れており、昇降は安心の2段階式となっています。また、手術台スカラのオプションが取り付け可能となっており、臨床現場に合わせてカスタマイズできます。



### ■ MIRAI Cage「ミライケージ」

猫用ケージと犬用ケージの特長と違いを分かりやすく説明。新旧の扉が閉まる音の比較、キャットフレンドリー対応表、オプションの使い方や取付け方法などを紹介しています。

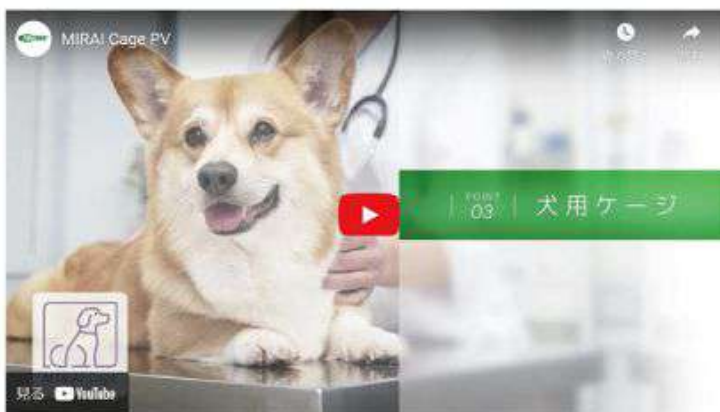

### ■ ペテリナリーチェア

獣医療のために開発された、ペテリナリーチェアは背もたれを回転すると「肘置き」になり、細かい作業の際に手ブレを防ぎます。高さ調整は、360度どこからでも操作できる円形フットペダルが付いています。





## ■ ICU-MENIOS

大型カラー液晶画面のタッチパネル方式、トラブルナビ、優れた空調システム、メンテナンスメニュー、各部詳細、オプションなどを紹介しています。

※ご注意：映像で紹介されている「ネットワークカメラ」「非常時メール送信機能」は仕様変更しました。



## ■ ウォーターテーブル ドルフィン

多機能シャワーヘッド、シンク、ロングストロークの電動昇降、オプションの使い方などを紹介しています。

※ご注意：映像で紹介されているシャワーヘッド・給水部は、ドルフィン用シャワーキットに仕様変更しました。



## ■ 手術台スカラ

スカラシリーズのVタイプ天板とFタイプ天板の手術台をご紹介します。天板をV字にする動作やチルト、電動昇降などを映像で見ることができます。さらに、手術台スカラの特長である、多彩なオプションもご紹介しします。



## ■ ペテリナリーシンク SW-120・BS-120・SC-120

2段式多機能シンク(SW-120)、ペーシンクシンク(BS-120)、サージカルシンク(SC-120)のご紹介をします。

便利な2段式スノコ、ロングホース混合栓、フルオープン収納、さらに多彩なオプションの使い方などもご紹介しています



## ■ 会社概要

社 名 : 株式会社東京メニックス  
代表者 : 代表取締役社長 福田 耕三  
設 立 : 1975 年 6 月 10 日  
資本金 : 5000 万円  
事業内容 : 医療機器の開発・製造、電子応用機器、ペット用品

### 薬事 [許可登録番号]

第一種動物用医療機器製造販売業許可番号 2 製販療 I 第 19 号  
動物用医療機器製造登録番号 26 製造療第 260 号・元製造第 462 号  
動物用高度管理医療機器販売許可番号 第 2-E012 号 .02 南家 -01 第 K-112 号  
高度管理医療機器販売許可番号 第 811506 号

## ■ 事業所の紹介

### 本 社

〒359-1141  
埼玉県所沢市小手指町 2-1442-8  
TEL : 04-2923-8841  
FAX : 04-2923-8864  
Email : info@t-menix.com  
Website : <https://t-menix.com>

#### 【埼玉県所沢市について】

所沢市は、「豊かなみどり」「人々のにぎわい」「元気な産業が同居する「みどり・文化・産業が調和したまち」を目指しています。トトロの森、狭山湖など豊かな自然が残っており、「日本の航空発祥の地」と知られ、所沢航空記念公園などがあり、プロ野球の埼玉西武ライオンズの本拠地になっています。最近では、「ところざわサクラタウン」が有名です。



環境試験室

(様々な温度環境を再現し、性能試験や耐久試験をおこないます)



## 北日本営業所・工場

〒013-0054

秋田県横手市柳田 1-11

TEL : 0182-35-6264

FAX : 0182-35-6265

[開設 2005年1月]

### 【秋田県横手市について】

横手市は県東南部の中心都市であり、国内屈指の豪雪地帯とされています。雪まつりの「かまくら」、日本三大やきそばの「横手やきそば」が有名で、市内には「秋田県立近代美術館」、「横手市増田まんが美術館」、「秋田ふるさと村」などの施設があります。



## 西日本営業所

〒562-0033

大阪府箕面市今宮1丁目7-10

TEL : 050-5471-0760

FAX : 050-3737-3113

(2025年8月移転)

### 【大阪府箕面市について】

箕面市(みのおし)は、大阪都市圏のベッドタウンとして南部には住宅地が広がっており、中部から北部にかけては山間地で、箕面滝、勝尾寺などの観光名所や箕面川ダムなどがあり、明治の森箕面国定公園として保全されています。



# 2026

## PRODUCT GUIDE

2025年12月発行



<https://t-menix.com>

## ”ホームページ”が便利です

充実したコンテンツと便利な機能を追加「チャット」「各種フォーム」など



### 導入事例

- ・製品の設置写真
- ・インタビュー



### カスタマーサービス

- ・修理依頼フォーム
- ・製品の不具合と対処方法



### 消耗品購入

- ・酸素センサー
- ・ゴムシートなど



### チャットボット

- ・自動応答でお答えします
- ・製品の不具合と対処方法



### お役立ちコラム



### WEBカタログ

- ・各種カタログをダウンロード

取扱販売店

## 株式会社 東京メニックス

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町2-1442-8

お問い合わせ先

Tel : 04-2923-8841

Fax : 04-2923-8864

E-mail : [info@t-menix.com](mailto:info@t-menix.com)

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。